


# beurer

## MG 79 Masāžas pistole Sensitive







LV Dziļo audu masāžas  
aparāts  
Lietošanas norādījumi

CE

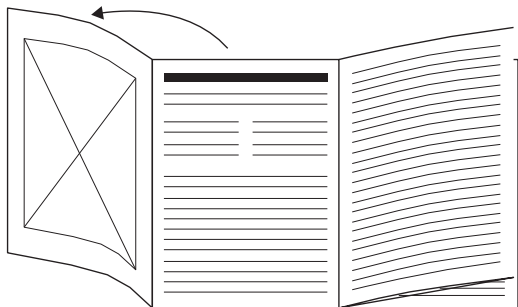

**LV** Pirms lietošanas instrukcijas izlasīšanas atlokiēt 3. lappusi.

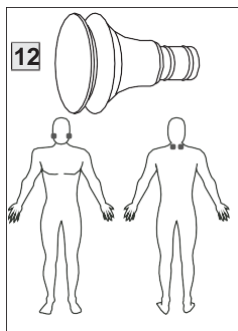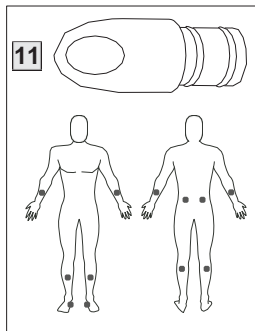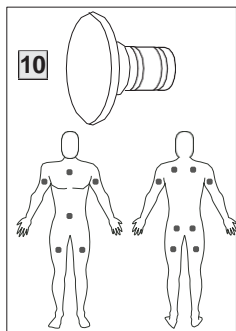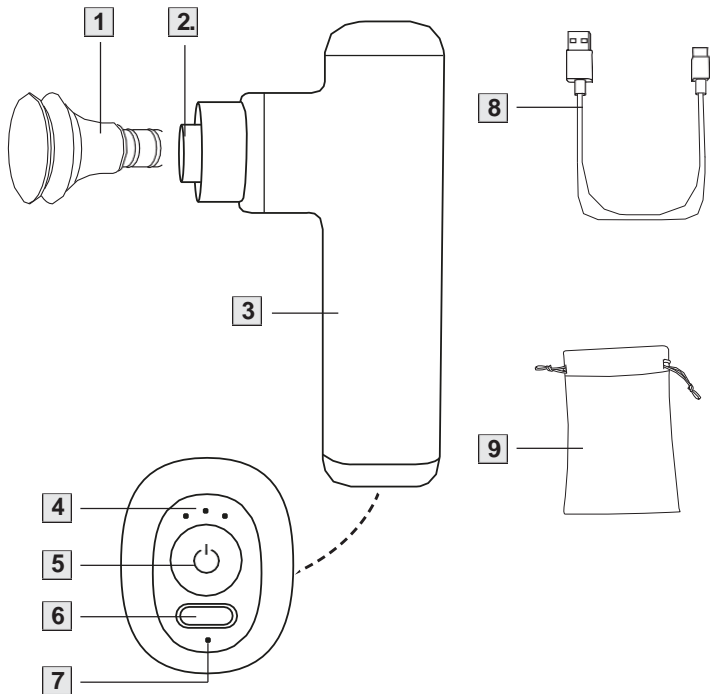



Rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju un saglabāiet to turpmākai izmantošanai. Padariet to pieejamu citiem lietotājiem un ņemiet vērā tajā ietverto informāciju.

1. Brīdinājumi un drošības norādījumi.....	4
2. Komplektācija .....	5
3. Paredzētais izmantojums .....	5
4. Apzīmējumi un simboli .....	6
5. Ierīces apraksts .....	7
5.1 Dziļo audu masāžas aparāts.....	7
5.2 Piederumi .....	7
6. Lietojums.....	9
6.1 Sākotnējā lietošana/akumulatora uzlāde	9
6.2 Piederuma izvēle/mainīšana .....	10
6.3 Ierīces ieslēgšana/intensitātes līmenis	10
.....	10
7. Tīrīšana un kopšana .....	11
8. Ko darīt, ja radušās problēmas? .....	11
9. Utilizācija .....	11
10. Tehniskās specifikācijas .....	12
11. Garantija/ apkope .....	12

## BRĪDINĀJUMS:

- Ierīce ir paredzēta tikai lietošanai mājās/privātai lietošanai, nevis komerciālai lietošanai.
- Šo ierīci drīkst lietot bērni, kas vecāki par 8 gadiem, un cilvēki ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām vai nepietiekamu pieredzi vai zināšanām, ja viņi tiek uzraudzīti vai ir instruēti, kā droši lietot ierīci, un pilnībā apzinās no tā izrietošos lietošanas riskus.
- Bērniem ir aizliegts rotaļāties ar šo ierīci.
- Tīrīšanu un lietotāja apkopi nedrīkst veikt bērni, izņemot, ja viņi tiek uzraudzīti.
- Ja ierīces strāvas kabelis ir bojāts, to nepieciešams utilizēt. Ja to nevar noņemt, ierīci nepieciešams utilizēt.
- Nekādā gadījumā nemēģiniet atvērt vai remontēt ierīci saviem spēkiem. Pretējā gadījumā tā var nedarboties pareizi. Ja netiks ievērotas šīs prasības, garantija zaudēs spēku.
- Neievietojiet nekādus priekšmetus ierīces atverē vai kustīgajās daļās. Nodrošiniet, lai kustīgās daļas vienmēr varētu brīvi kustēties.
- Neiespiediet nevienu ķermeņa daļu, jo īpaši pirkstus, starp kustīgajiem masāžas elementiem vai to turētāju.

# 1. BRĪDINĀJUMI UN DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

## BRĪDINĀJUMS:

Neizmantojiet ierīci, ja masējamā zonā jums ir medicīniska anomālija vai trauma (piemēram, noslīdējis disks, vaļējas brūces).

- Neizmantojiet ierīci, ja lietojat elektrokardiosimulatoru.
- Neizmantojiet ierīci sirds apvidus masāžai.
- Neizmantojiet ierīci uz pietūkušas, apdegušas, iekaisušas vai ievainotas ādas un ķermeņa daļām.
- Neizmantojiet ierīci uz iegriezumiem, kapilāriem, varikozām vēnām, pinnēm, kuperozas ādas, ja jums ir herpes vai citas ādas slimības.
- Neizmantojiet ierīci grūtniecības laikā.
- Neizmantojiet ierīci uz galvas vai sejas (piemēram, acīm), izņemot žokļa muskuļus, ja jums nav zobu implantu vai vispārējas zobu ārstēšanas.
- Neizmantojiet ierīci uz balsenes, kaunuma zonā vai citās īpaši jutīgās ķermeņa daļās.
- Neizmantojiet ierīci uz mugurkaula vai tieši uz kaula.
- Neizmantojiet ierīci miega laikā.
- Neizmantojiet ierīci dzīvniekiem.
- Neizmantojiet ierīci pēc medikamentu vai alkohola lietošanas (traucētas kognitīvās spējas!).
- Neizmantojiet ierīci transportlīdzeklī.



**Pirms masāžas ierīces lietošanas jākonsultējas ar ārstu, ja:**

- ja jums ir smaga slimība.
- ja jums ir tromboze.
- ja jums ir diabēts.

- ja jums ir sāpes, kuru cēlonis nav zināms.

## BRĪDINĀJUMS:

- Pastāv nosmakšanas briesmas! Neļaujiet bērniem rotaļāties ar iepakojuma materiāliem.
- Pastāv nosmakšanas briesmas! Glabājiet ierīces piederumus bērniem nepieejamā vietā.
- Elektriskās strāvas trieciena risks! Pārlicinieties, ka ierīce nenonāk saskarē ar ūdeni vai citiem šķidrumiem.
- Elektriskās strāvas trieciena risks! Nekad neņemiet rokās ierīci, kas iekritusi ūdenī.
- Ierīces lietošanas laikā bērni vienmēr ir jāuzrauga.
- Nepareizi lietojot ierīci vai ignorējot šos lietošanas norādījumus, pastāv ugunsgrēka risks.
- Nekad neatstājiet ierīci bez uzraudzības, kad tā darbojas, jo īpaši, ja tuvumā ir bērni.
- Nekad nelietojiet ierīci zem pārklāja, piemēram, segas vai spilvena.
- Nekad nelietojiet ierīci benzīna vai citu viegli uzliesmojošu vielu tuvumā.
- Darbiniet ierīci tikai sausēs iekštelpās.
- Nekad nelietojiet ierīci vannā vai saunā.

## SVARĪGI

- Pirms lietošanas pārlicinieties, ka ierīcei un tās piederumiem nav redzamu bojājumu. Ja jums ir kādas šaubas, nelietojiet ierīci un sazinieties ar mazumtirgotāju vai izmantojiet norādīto klientu apkalpošanas centra adresi.
- Nekad neatveriet korpusu.
- Ierīci turiet tālu no spiciem vai asiņiem priekšmetiem.
- Ja ierīce ir nomesta vai citādi bojāta, to vairs nedrīkst lietot.

- Izslēdziet ierīci pēc katras lietošanas reizes un pirms tīrīšanas.
- Nekad nelietojiet ierīci ilgāk par 15 minūtēm (pārkaršanas risks). Ļaujiet ierīcei atdzist vismaz 15 minūtes, pirms lietojat to atkārtoti.
- Izmantojiet ierīci tikai ar komplektācijā iekļautajiem piederumiem.
- Aizsargājiet ierīci un piederumus no triecieniem, putekļiem, ķīmiskām vielām, krasām temperatūras izmaiņām, elektromagnētiskajiem laukiem un tuvumā esošiem karstuma avotiem (krāsni, sildītāji).
- Baterijas nedrīkst izjaukt, atvērt vai saspīest.
- Lai baterijas kalpošanas laiks būtu pēc iespējas ilgāks, vismaz 2 reizes gadā bateriju pilnībā uzlādējiet.
- Pirms uzlādes vienmēr izslēdziet ierīci.
- Pirms lietošanas baterijas ir pareizi jāuzlādē. Vienmēr ir jāievēro ražotāja norādījumi un šajā lietošanas instrukcijā sniegtās specifikācijas par pareizu uzlādi.

## BRĪDINĀJUMS:

### Remonts

- Nekad nemēģiniet labot ierīci saviem spēkiem!
- Elektrisko ierīču remontu drīkst veikt tikai speciālisti. Nekādā gadījumā nemēģiniet atvērt vai remontēt ierīci saviem spēkiem. Pretējā gadījumā tā var nedarboties pareizi. Neatbilstoši veikts remonts var būtiski apdraudēt lietotājus. Lai veiktu remontu, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu vai pilnvaroto mazumtirgotāju. Ja netiks ievērotas šīs prasības, garantija zaudēs spēku.

## BRĪDINĀJUMS:

### Piezīmes par bateriju lietošanu

- Ja šķidrums no baterijas elementa nonāk uz ādas vai acīs, nomazgājiet skartās vietas ar ūdeni un meklējiet medicīnisko palīdzību.
- **Aizrīšanās risks!** Mazi bērni var norīt un aizrīties ar baterijām. Tāpēc baterijas glabājiet maziem bērniem nepieejamā vietā!
- Ja baterijai rodas noplūde, uzvelciet aizsargcimdus un atbrīvojieties no ierīces.
- Aizsargājiet baterijas no pārmērīga karstuma iedarbības.
- **Sprādziena risks!** Nemetiet baterijas ugunī!

## 2. KOMPLEKTĀCIJA

Pārbaudiet, vai piegādes kartona iepakojuma ārpusē ir neskarta, un pārlicinieties, vai tajā ir viss saturs. Pirms lietošanas pārlicinieties, ka dziļo ausu masāžas aparātam un tā piederumiem nav redzamu bojājumu.

- 1 Dziļo ausu masāžas aparāts
- 3 Piederumi
- 1 USB-C kabelis
- 1 Uzglabāšanas somiņa
- 1 Lietošanas instrukcija

## 3. PAREDŽĒTAIS LIETOŠANAS VEIDS



### BRĪDINĀJUMS:

Lietojiet dziļo ausu masāžas aparātu tikai ar komplektācijā iekļautajiem piederumiem. Masāžas aparāts un tā piederumi nav medicīnas ierīces, bet gan masāžas procedūras ierīces. Dziļo ausu masāžas aparāts ir piemērots tikai personīgai lietošanai, nevis medicīniskiem vai komerciāliem mērķiem. Ierīci atļauts izmantot tikai paredzētajam lietošanas mērķim un lietošanas instrukcijā norādītajā veidā. Jebkāda veida nepareiza lietošana var būt bīstama. Ražotājs neuzņemas atbildību par kaitējumu, kas rodas neatbilstošas vai neuzmanīgas lietošanas rezultātā. Neizmantojiet dziļo ausu masāžas aparātu, ja

uz jums attiecas uzskaitītie brīdinājumi un drošības norādījumi. Ja neesat pārliecināts, vai dziļo audu masāžas aparāts ir piemērots tieši jums, konsultējieties ar ārstu.



## 4. APZĪMĒJUMI UN SIMBOLI

Šajā lietošanas instrukcijā, uz ierīces iepakojuma un tipa plāksnītes tiek izmantoti šādi simboli:

<p><b>BĪSTAMI</b></p> <p>Norāda uz tūlītējām briesmām. Ja no tām neizvairās, tās var izraisīt nāvi vai nopietnus ievainojumus.</p>
<p><b>BRĪDINĀJUMS</b></p> <p>Norāda uz potenciāli draudošām briesmām. Ja tās netiek novērstas, pastāv nāves vai nopietnu traumu risks.</p>
<p><b>UZMANĪBU</b></p> <p>Norāda uz potenciāli draudošām briesmām. Ja tās netiek novērstas, var rasties nelieli vai viegli ievainojumi.</p>
<p><b>PIEZĪME</b></p> <p>Norāda uz potenciāli bīstamu situāciju. Ja tā netiek novērsta, var tikt bojāta sistēma vai kāda tās tuvumā esoša ierīce.</p>
<p> Izlasiet instrukciju</p>
<p> <b>Informācija par produktu</b> Svarīga informācija</p>
<p><b>CE marķējums</b> Šis produkts atbilst Eiropas un nacionālo direktīvu prasībām.</p>

<p> Tikai lietošanai iekštelpās.</p>
<p> Ražotājs</p>
<p> Nelietojiet dziļo audu masāžas aparātu cilvēkiem ar implantētām elektriskajām ierīcēm (piemēram, elektrokardiostimulatoru).</p>
<p> Atdaliet iepakojuma elementus un atbrīvojieties no tiem saskaņā ar vietējiem noteikumiem.</p>
<p> Neizmetiet baterijas, kas satur bīstamas vielas, kopā ar sadzīves atkritumiem.</p>
<p> Atdaliet izstrādājumu un iepakojuma elementus un atbrīvojieties no tiem saskaņā ar vietējiem noteikumiem.</p>
<p><b>EAC</b> Produkti uzskatāmi atbilst EAEU tehnisko noteikumu prasībām.</p>
<p><b>UK CA</b> Atbilstības novērtējuma marķējums Apvienotajai Karalistei</p>
<p> Marķējums iepakojuma materiāla identificēšanai. A = materiāla saīsinājums, B = materiāla numurs: 1-7 = plastmasa, 20-22 = papīrs un kartons</p>
<p> Utilizācija jāveic saskaņā ar Direktīvu par elektrisko un elektronisko ierīču atkritumiem - EEIA</p>
<p> Līdzstrāvas strāvas savienojuma polaritāte</p>



	<b>Līdzstrāva</b> Ierīce ir piemērota lietošanai tikai ar līdzstrāvu
	Importētāja simbols

## 5. IERĪCES APRAKSTS

### 5.1 Dziļo audu masāžas aparāts

Saistītie zīmējumi ir parādīti 3. lappusē.

<b>1</b>	<b>Piederumi</b> Pieejami 3 dažādi piederumi
<b>2</b>	<b>Piederumu savienojums</b>
<b>3</b>	<b>Rokturis</b>
<b>4</b>	<b>Intensitātes indikators (3 LED)</b> 3 gaismas diodes, sākot no kreisās uz labo pusi
<b>5</b>	<b>iesl./izsl. poga</b>
<b>6</b>	<b>USB-C kabeļa savienojums</b>
<b>7</b>	<b>Baterijas uzlādes indikators (1 LED)</b> <u>Darbības laikā:</u> LED deg baltā krāsā = akumulatora uzlādes līmenis 25–100% LED mirgo sarkanā krāsā = akumulatora uzlādes līmenis 0-25% <u>Uzlādes laikā:</u> LED mirgo baltā krāsā = baterijas uzlāde LED deg baltā krāsā = baterija ir pilnībā uzlādēta
<b>8</b>	<b>USB-C kabelis</b>
<b>9</b>	<b>Uzglabāšanas somiņa</b>

## 5.2 Piederumi

<b>10</b>	<b>Plakanais uzgalis</b> Vislabāk piemērots lielu ķermeņa laukumu (piemēram, augšstilbu) apstrādei.
<b>11</b>	<b>Spirālveida uzgalis</b> Vispiemērotākais dziļo muskuļu audu apstrādei un mērķtiecīgai masāžai (piemēram, pēdām).
<b>12</b>	<b>Gaisa spilvena uzgalis</b> Vislabāk piemērots jutīgām ķermeņa daļām (piemēram, kaklam).

## 6. LIETOŠANA

### 6.1 Sākotnējā lietošana/ Baterijas uzlāde



Masāžai vienmēr jābūt patīkamai. Procedūru sāciet ar zemāko intensitātes līmeni un pēc tam, ja nepieciešams, palieliniet to atbilstoši savām vajadzībām. Var rasties neliela hematoma - tas ir pozitīvs terapeitisks efekts, jo ierīces lietošana var selektīvi veicināt asins plūsmu. Izolētos gadījumos uz ādas var parādīties arī apsārtuma zonas. Ja rodas pārmērīgs ādas kairinājums, pārtrauciet ierīces lietošanu un konsultējieties ar ārstu. Atkarībā no sasprindzinājuma pakāpes, ieteicamais masāžas laiks ir aptuveni 10 minūtes katrā zonā (kakls, pleci, mugura, rokas, sēžamvieta vai kājas).

Pirms pirmās dziļās audu masāžas aparāta lietošanas vispirms uzlādējiet to vismaz 1:30 stundas. Lai to izdarītu, rīkojieties šādi:

1. Noņemiet no ierīces visu iepakojuma materiālu.

- Savienojiet pievienoto USB-C kabeli ar dziļo ausu masāžas ierīci.



USB-C savienojums atrodas roktura aizmugurē.

- Savienojiet USB-C kabeli ar USB-C tīkla kontaktdakšu (nav iekļauta komplektācijā), ievietojiet USB-C tīkla kontaktdakšu piemērotā kontaktligzdā. Baterijas uzlādes līmeņa indikators rāda pašreizējo baterijas uzlādes līmeni.

Baterijas uzlādes līmeņa indikators mirgo baltā krāsā = baterijas uzlāde

Baterijas uzlādes līmeņa indikators iedegas baltā krāsā = baterijas uzlādēta


=

- Tiklīdz baterijas uzlādes līmeņa indikators iedegas baltā krāsā, izņemiet USB-C tīkla kontaktdakšu (nav iekļauta komplektācijā) no kontaktligzdas. Baterija ir pilnībā uzlādēta. Pilnībā uzlādētas baterijas darbības ilgums ir aptuveni 3 stundas. Tiklīdz baterijas uzlādes indikators sāk mirgot sarkanā krāsā, dziļo ausu masāžas aparāts ir jāuzlādē, pretējā gadījumā tas automātiski izslēdzas.

## 6.2 Piederuma izvēle/maiņa

Pirms masāžas uzsākšanas izvēlieties atbilstošu piederumu. Lai mainītu piederumu, rīkojieties šādi:

- Horizontāli noņemiet esošo piederumu no dziļo ausu masāžas aparāta.

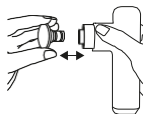

- Stingri ievietojiet vēlamo piederumu dziļo ausu masāžas ierīcē, līdz jūtat, ka tas stingri iespiežas savā vietā.

## 6.3 Ierīces ieslēgšana/ intensitātes līmeņa izvēle

**i** Dziļo ausu masāžas aparātam ir automātiskās izslēgšanās funkcija. Tas nozīmē, ka dziļās ausu masāžas aparāts automātiski izslēdzas pēc aptuveni 10 minūšu lietošanas.

- Tad nospiediet un turiet iesl./izsl. pogu 3 sekundes, iedegas baterijas uzlādes indikators. Ierīce ir gaidīšanas režīmā.

- Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai ieslēgtu ierīci. Kreisais LED intensitātes indikators sāk iedegties. Masāža sākas ar 1. intensitātes līmeni.

- Lai pārslēgtos starp intensitātes līmeņiem, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu. Intensitātes indikators parāda pašreizējo intensitātes līmeni.

- intensitātes līmenis (1700 apgr./min) →
- intensitātes līmenis (2450 apgr./min) →
- intensitātes līmenis (3200 apgr./min) → Gaidīšana

- Ierīci var izslēgt jebkurā lietošanas brīdī, nospiežot un turot iesl./izsl. pogu (3 sek.).

Ja trešajā intensitātes līmenī vēlreiz nospiežat ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, ierīce izslēdzas, ierīce ir gaidīšanas režīmā.

Ja ierīce lietošanas laikā apstājas, tas var būt saistīts ar pārmērīgu spiedienu. Lietojot dziļo ausu masāžas aparātu, pārliecinieties, ka uz to netiek izdarīts pārāk liels spiediens.

## 7. TĪRĪŠANA UN APKOPE

### Tīrīšana

#### BRĪDINĀJUMS:

- Pirms tīrīšanas katru reizi izslēdziet ierīci.
- Netīriet ierīci trauku mazgājamajā mašīnā.
- Ierīci tīriet tikai ar nedaudz mitru drānu un neabrazīvu tīrīšanas līdzekli. Lai tīrīšana būtu higiēniska, notīriet piederumus **10** / **11** / **12** ar ūdeni un neabrazīvu tīrīšanas līdzekli.
- Tīriet ierīci, izmantojot tikai norādītās metodes. Nekādos apstākļos ierīcē vai piederumos nedrīkst iekļūt šķidrums.
- Lietojot masāžas eļlas (ieteicams ar piederumiem **10** / **11**), pārļiecinieties, ka visi atlikumi ir pilnībā noņemti un notīrīti.
- Neizmantojiet ierīci vai piederumus, kamēr visas sastāvdaļas nav pilnīgi sausas.

### Kopšana

Ja neplānojat lietot ierīci ilgāku laiku, iesakām to uzglabāt oriģinālajā iepakojumā sausā vidē, nodrošinot, ka tā nav apkrauta ar papildu priekšmetiem.

## 8. KO DARĪT, JA RADUŠĀS PROBLĒMAS?

<b>Problēma</b>	Dziļo audu masāžas aparāts lietošanas laikā apstājas.
<b>Risinājums</b>	Lietojot dziļo audu masāžas aparātu, pārļiecinieties, ka uz to netiek izdarīts pārāk liels spiediens. Ja spiediens būs pārāk liels, ierīce uz īsu brīdi apstāsies.

## 9. UTILIZĀCIJA

### Bateriju iznīcināšana

Tukšas, pilnībā izlādējušās baterijas ir jāznīcina, izmantojot īpaši šim nolūkam paredzētas savākšanas kastes, otrreizējās pārstrādes punktus vai elektronikas mazumtirgotājus. Likumdošanā ir noteikts, ka baterijas ir jāznīcina.

Tālāk norādītie kodi ir uzdrukāti uz baterijām, kas satur kaitīgas vielas:

Pb = baterija satur svīnu

Cd = baterija satur kadmiju

Hg = baterija satur dzīvsudrabu



Bojātas vai izlietotas baterijas ir jāpārstrādā saskaņā ar Direktīvu 2006/66/EK un tās grozījumiem. Nododiet baterijas un/vai ierīci atbilstošās atkritumu savākšanas vietās.

Vides aizsardzības apsvērumu dēļ neizmetiet ierīci kopā ar sadzīves atkritumiem.

Izmetiet ierīci piemērotā vietējā savākšanas vai pārstrādes vietā



jūsu valstī. Utilizācija jāveic saskaņā ar Direktīvu par elektrisko un elektronisko ierīču atkritumiem (EEIA). Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, lūdzu, sazinieties ar vietējām par atkritumu apglabāšanu atbildīgajām iestādēm.

## 10. TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Ekspluatācijas, pieslēdzot pie elektrotīkla lēeja	5.0 V $\overline{\text{---}}$ 1.0 A
Izmēri	apt. 8.4 x 14.7 * cm 3.8 cm (bez piederumiem)
Svars	Aptuveni 250 g (bez piederumiem, bez USB-C kabeļa)
Baterija: Jauda Nominālais spriegums Tipa apzīmējums	1100 mAh 3.7 V Litija jonu

## 11. GARANTIJA / APKOPE

Sīkāka informācija par garantiju un garantijas nosacījumiem ir sniegta pievienotajā garantijas brošūrā.