



Silk'n[®]
Beautiful Technology

Jewel Luxx
JWX20PE3001

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA



Silk'n Jewel

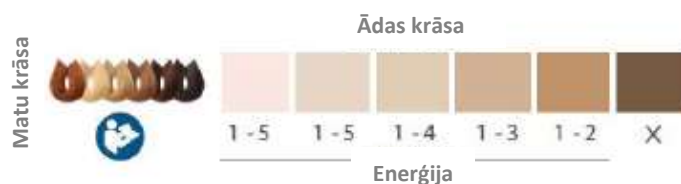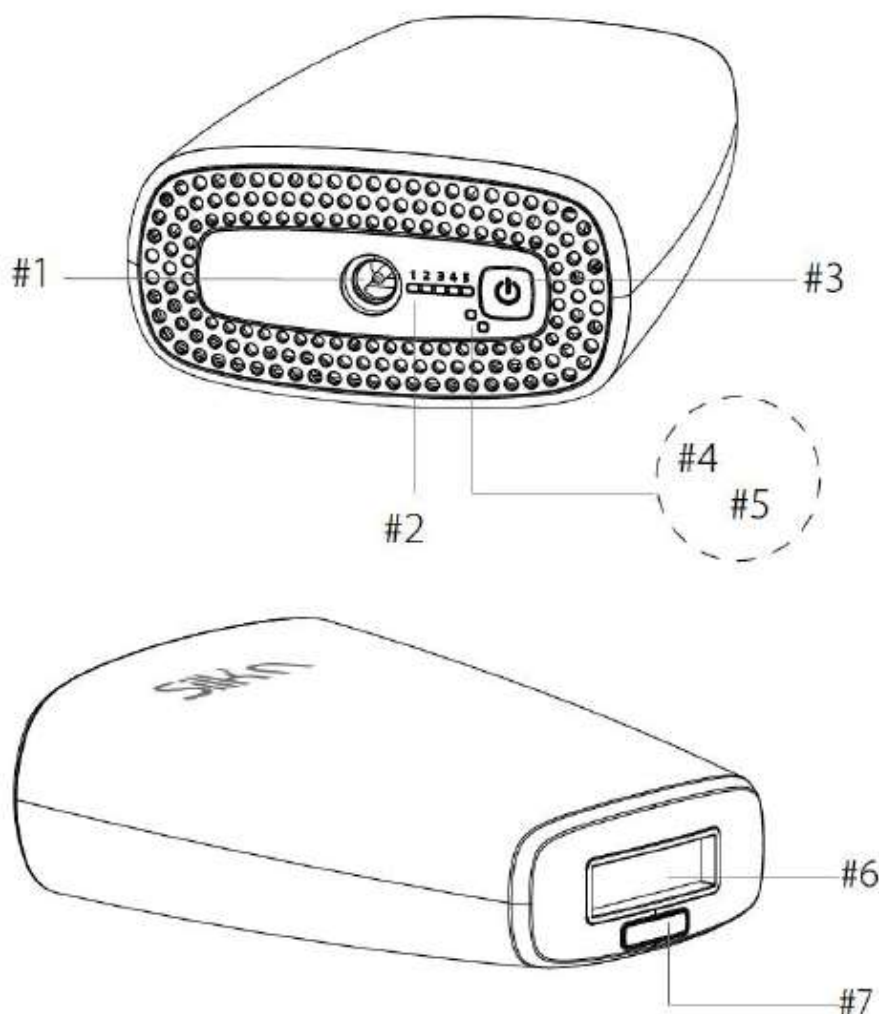

1. Brīdinājumi !

Šī lietotāja rokasgrāmata ir balstīta uz standartiem un Eiropas Savienībā spēkā esošajiem noteikumiem. Atrodies ārvalstīs, jums jāievēro arī konkrētās valsts specifiskās vadlīnijas un likumus.

Pirms pirmās lietošanas, lūdzu, pilnībā izlasiet šo lietotāja rokasgrāmātu un saglabājiet to turpmākai lietošanai. Mēs iesakām pirms katras darbošanās iepazīties ar instrukciju.

- Vienmēr turiet ierīci un tās daļas sausas. Pirms adaptera pievienošanas elektrotīklam pārlicinieties, ka rokas ir sausas.

- Nelietojiet ierīci vidē, kur pastāv sprādziena risks. Ierīce nav piemērota lietošanai uzliesmojoša anestēzijas maisījuma ar gaisu, skābekli vai slāpekļa oksīdu klātbūtnē. Turiet ierīci un visas tās daļas prom no atklātas liesmas un karstām virsmām.
- Turiet adapteri vienmēr pieejamu, lai avārijas gadījumā to varētu viegli izņemt no elektrības.
- Vienmēr izslēdziet ierīci un atvienojiet to no elektrotīkla, kad nelietojat, ja plānojat to tīrīt vai ja rodas kļūme.
- Nekad nevelciet adapteri no kontaktligzdas aiz kabeļa. Vienmēr noņemiet to, satverot adapteri.

- Nelietojiet ierīci vannas istabā.
- Nekad neizmantojiet adapteri, ja tam ir bojāts kabelis vai kontaktdakša, ja tas nedarbojas pareizi vai ir iegremdēts ūdenī.
- Ja tā notiek, atvienojiet adapteri pirms tam pieskarities. Adaptera neatvienošana no elektrotīkla var izraisīt elektriskās strāvas triecienu!
- Nelietojiet, ja detaļas vai piederumus nav piegādājis ražotājs, kā noteikts šajā rokasgrāmatā, vai ja ierīce ir jebkāda veidā bojāta, šķiet, ka tā nedarbojas pareizi vai ja redzat vai jūtat dūmu smaku.
- Nemēģiniet pārveidot, atvērt vai labot ierīci. Jūs varat tikt pakļauts elektriskās strāvas triecienam. Tas arī anulēs garantiju.
- Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci vai kādu tās daļu. Viņi var savainoties vai norīt sīkas detaļas un aizrīties.

2. Kontrindikācijas

- Ierīce ir piemērota pieaugušajiem no 16 gadu vecuma.
- Ierīci nedrīkst lietot šādas personas: bērni, pieaugušie ar ierobežotām fiziskām, maņu vai psiholoģiskām spējām vai tiem, kam trūkst pieredzes vai zināšanu par ierīces lietošanu.
- Ierīce nav paredzēta visiem. Matu noņemšana ar intensīviem pulsējošiem gaismas avotiem dažiem cilvēkiem var izraisīt pastiprinātu matu augšanu, lai gan tas ir ārkārtīgi reti (mazāk nekā 1% iedzīvotāju). Sievietēm iespējamās zonas ir seja un kakls, bet vīriešiem - mugura, pleci un augšdelmi, lai gan tas varētu skart arī citas vietas. Vislielākās riska grupas ir cilvēki no Vidusjūras, Tuvajiem Austrumiem un Dienvidāzijas.
- Ierīce nav piemērota lietošanai bērniem vai dzīvniekiem.

3. Drošības līdzekļi

Ar Silk'n drošība ir pirmajā vietā

Home Pulsed Light™ (HPL) tehnoloģija nodrošina izcilu drošību ar zemāku enerģijas līmeni. HPL™ sasniedz ilgtermiņa matu noņemšanas rezultātus par daļu no enerģijas līmeņa, ko izmanto citas gaismas bāzes matu noņemšanas iekārtas. Zema enerģija samazina kaitējuma vai komplikāciju risku un veicina jūsu vispārējo drošību.

3.1 Ādas aizsardzība

Vieglā matu noņemšana nav piemērota iedegušai ādai. Ierīcei ir iebūvēts ādas krāsas sensors (#7), kas paredzēts uzklātās virsmas sejas krāsas mērīšanai un nodrošina enerģijas līmeni atbilstoši ādas krāsai.

- Nesabojājiet adaptera kabeli un nelieciet to uz asām malām. Novietojiet to tā, lai tas neradītu klupšanas risku.
- No šīs ierīces tiek izstarots bīstams optiskais starojums. Neskatieties uz darba lampu. Var rasties acu traumas.
- Nelietojiet ierīci vietās, kur atrodas monitoringa aprīkojums (piemēram, sirds monitori, ECG trauksmes signāli), kas ierīces lietošanas laikā var nedarboties pareizi.

! Nelietojiet ierīci, ja:

- ir dabiski tumša āda (skatiet ādas krāsu tabulu šīs lietotāja rokasgrāmatas priekšpusē). Tumšas ādas apstrādāšana var izraisīt tādas nelabvēlīgas sekas kā apdegumus, pūslīšus un ādas krāsas izmaiņas (hiper- vai hipopigmentāciju).
- ir dabiski balti, pelēki, gaiši blondi vai sarkani mati uz ķermeņa.
- esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti.
- ir bijusi keloīdu rētu veidošanās vēsture.
- esat cietusi vai ciešat no epilepsijas.
- ir slimība, kas saistīta ar fotosensitivitāti, piemēram, porfirija, polimorfās gaismas izvirzums, saules nātrene, vilkēde utt.
- ja jums ir bijis ādas vēzis, kā arī jebkura vēža veids vai iespējami ādas ļaundabīgi audzēji.
- pēdējo 6 mēnešu laikā esat saņēmis no ārsta zāles ādas stāvokļa ārstēšanai.
- ir alerģija pret metālu vai ir jutība pret saskari ar hromu.
- ja jums ir kāds cits stāvoklis, kas, pēc ārsta domām, padarītu ierīces lietošanu nedrošu.
- nevar pareizi sajust siltumu, slimības vai citu ar veselību saistītu problēmu dēļ.

! Nelietot šādām ķermeņa daļām:

- uz iedegušas ādas.
- ap acīm vai to tuvumā. Lietojiet zem vaigu kauliem.
- uz tetovējumiem vai pastāvīga grima, tumši brūniem vai melniem plankumiem (piemēram, lieliem vasaras raibumiem, dzimumzīmēm vai kārpām), krūšugaliem, dzimumorgāniem, ap anālo atveri vai lūpām.
- vietas ar injicētām pildvielām vai toksīniem.
- ķermeņa daļa, kurai vēsturē ir bijušas herpes izcelšanās.
- āda, kurai ir aktīva ekzēma, psoriāze, bojājumi, atvērtas brūces vai infekcijas (aukstumpumpas), patoloģiski ādas stāvokļi, ko izraisa sistēmiskas vai vielmaiņas slimības (piemēram, diabēts).
- vietas, kas ir pakļautas rosacejai.
- uz paplašinātām vēnām.
- vietas, kas ir sāpīgas.
- vietas, kur vēlaties, lai mati vēlāk augtu. Rezultāti ir paliekoši.

Turklāt apstrādes virsma (#6), caur kuru tiek padoti gaismas impulsi, ir iegremdēta ierīces iekšpusē. Tas ļauj ierīcei aizsargāt jūsu ādu, izvairoties no tiešas saskares starp apstrādājamo virsmu (#6) un ādu.

3.2 Acu aizsardzība

Ierīcei ir iebūvēta drošības funkcija acu aizsardzībai, kas ir izstrādāta tā, lai gaismas impulsi nevarētu izstarot, kad apstrādājamā virsma (#6) ir vērsta pret tukšu gaisu. Drošības funkcija ļauj darboties tikai tad, ja apstrādes virsma (#6) saskaras ar ādu.

3.3 Saules iedarbība

- Saules iedarbība ietver pastāvīgu neaizsargātu tiešu saules staru iedarbību ilgāk par 15 minūtēm vai pastāvīgu neaizsargātu izkliedētas saules gaismas iedarbību ilgāk par 1 stundu.

- Nelietot uz iedegušas ādas pēc nesenas saules iedarbības, ieskaitot sauļošanās ierīces. Ierīces lietošana uz ādas, kas nesēn bijusi pakļauta saules gaismai, var izraisīt nelabvēlīgu ietekmi, piemēram, apdegumus, pūslīšus un ādas krāsas izmaiņas (hiper- vai hipopigmentāciju).
- Izvairieties no turpmākas saules iedarbības 4 nedēļas pirms un 2 nedēļas pēc lietošanas. Tas ir tāpēc, ka lielāks melanīna daudzums pakļauj ādu lielākam riskam, ja tiek izmantota jebkura uz gaismu balstīta matu noņemšanas metode. Tas attiecas uz visiem ādas tipiem, pat tiem, kuri, šķiet, ātri neiedeg.

4. Iepazīstiet savu ierīci

4.1 Ierīces apraksts

Ierīce ir uz gaismu balstīta ierīce pastāvīgai matu mazināšanai, kas paredzēta lietošanai mājās. Tā ir jaudīga elektriskā ierīce, un tā jāizmanto, īpašu uzmanību pievēršot drošībai.

4.2 Paredzētais lietojums

IPL ierīce ir bezrecepšu ierīce, kas paredzēta, lai noņemtu nevēlamus matiņus un ietekmētu ilgstošu vai pastāvīgu matu izkrišanu. Pastāvīga matu izkrišana tiek definēta kā ilgstoša stabila matu skaita samazināšanās, kas atjaunojas pēc ārstēšanās režīma. Ierīci var izmantot, lai noņemtu nevēlamus ķermeņa matiņus. Ideālas ķermeņa zonas ir paduses, bikini līnija, rokas, kājas, seja (zem vaigu kauliem), mugura, pleci un krūtis.

Aparāts ir medicīniska ierīce, kas paredzēta tikai kosmētiskām procedūrām. Tas ir paredzēts privātai lietošanai un nav piemērots komerciālai vai terapeitiskai lietošanai. Nelietojiet nekādiem citiem mērķiem, kā aprakstīts šajā rokasgrāmatā.

4.3 Iepakojuma saturs

Iepakojuma saturs atšķiras atkarībā no iegādātās opcijas.





- Matu noņemšanas ierīce
- Adapteris ar kabeli
- Tīrīšanas audums
- Uzglabāšanas futrālis
- Lietotāja rokasgrāmata
- Garantijas buklets

4.4 Ierīces detaļas

Skatiet diagrammu šīs rokasgrāmatas priekšpusē lappusē, lai redzētu katras funkcijas atrašanās vietu.

- Adaptēra ligzda (#1)
- Enerģijas līmeņa indikatori (1-5) (#2)
- Vadības poga (#3)
- Gatavības indikators (#4)
- Ādas krāsas sensora gaisma (#5)
- Apstrādes virsma (#6)
- Ādas krāsas sensors (#7)

4.5 Ierīces vadības elementi

Poga	Funkcija / režīms
Vadības poga (#3) 	<ul style="list-style-type: none"> Ilgli nospiežot: ieslēdz vai izslēdz ierīci. Īsa nospiešana: katra nospiešana palielina enerģijas līmeni. Kad tiek sasniegts 5. enerģijas līmenis, nākamais spiedienu atgriežas 1. enerģijas līmenī.
Enerģijas līmeņa indikatori x5 (#2) 	<ul style="list-style-type: none"> Pastāvīga zaļā: enerģijas līmenis ir aktīvs. Kad ierīce ir ieslēgta, 1. līmeņa enerģijas indikators deg zaļā krāsā. Enerģijas līmeņa gaismas indikators atbilst izvēlētajam enerģijas līmenim.
Gatavības gaisma (#4) 	<ul style="list-style-type: none"> Pastāvīga zaļā: kad ierīce ir ieslēgta. Gaisma izslēgta: ierīce gatavojas nākamajam impulsam. Mirgo zaļš: nevar noteikt ādas krāsu vai nav kustības pāri ādai.
Ādas krāsa sensora gaisma (#5) 	<ul style="list-style-type: none"> Mirgo zaļā: ādas krāsa ir pārāk tumša drošai lietošanai.

4.6 Enerģijas līmeņi

- Enerģijas līmenis nosaka gaismas impulsa intensitāti, kas tiek raidīts jūsu ādai. Palielinoties enerģijas līmenim, palielinās arī rezultāti, kā arī iespējamo blakusparādību un komplikāciju risks (skatīt sadaļu 5.3. Iespējamās blakusparādības).
- Ierīcei ir 5 enerģijas līmeņi no 1 (zemākā) līdz 5 (augstākā), ko attēlo 5 enerģijas līmeņa indikatori (#2). Lai mainītu līmeņus, īsi nospiediet vadības pogu (#3).
- Lai noteiktu pareizo enerģijas līmeni jūsu apstrādājamajai zonai, skatiet sadaļu 6.3.


4.7 Ierīces sensori

Ierīcei ir pieskārienu, kustību un krāsu sensori.

- Pieskāriens un kustība: ierīce izstaro atkārtotus impulsus tikai tad, ja tā cieši saskaras ar ādu, un jūs to nepārtraukti pārvietojat pa ādu.
- Krāsa: gaišo matu noņemšana uz tumšākiem ādas toņiem var izraisīt nelabvēlīgu ietekmi, piemēram, apdegumus, pūslīšus un ādas krāsas izmaiņas (hiper- vai hipopigmentāciju). Ierīcei ir ādas krāsas sensors (#7), kas automātiski nosaka jūsu ādas krāsu. Ādas krāsas sensors (#7) pārbauda jūsu ādas krāsas stāvokli katras procedūras sākumā un dažreiz tās laikā.

- Ja ierīce konstatē, ka jūsu ādas tonis ir pārāk tumšs drošai lietošanai, mirgo ādas krāsas sensora gaisma (#5).

4.8 Pulsējošs un slīdošs

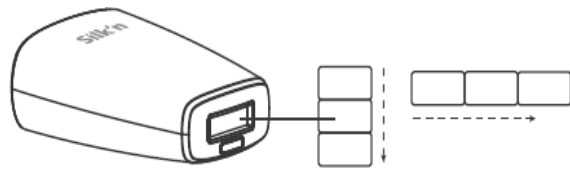

Neatkarīgi no tā, vai izlemjat pulsēt vai slīdēt:

- Lietojot ierīci, izvairieties no spraugām vai pārklāšanās. Pārklāšanās palielina nelabvēlīgas ietekmes iespējamību.
- Neapstrādājiet vienu un to pašu ādas zonu vairāk nekā vienu reizi sesijas laikā.

Pulsēšana ir labākā metode lai noteiktu plankumu vai mazu vietu apstrādei.

- Piespiediet apstrādes virsmu (#6) pret ādu. Velciet rindās (pāri vai uz leju, kā parādīts attēlā). Sāciet ar katras rindas vienu galu un pārejiet uz otru galu.
- Apstrādes virsma (#6) rada īslaicīgas spiediena pēdas uz apstrādātās vietas, lai jūs varētu redzēt attiecīgās vietas.
- Pēc katra impulsa pārvietojiet apstrādes virsmu (#6) uz nākamo vietu. Turpiniet veikt šo pulsējošo darbību zonā, kuru apstrādājat.

Slīdēšana ir labākā tehnika, lai apstrādātu lielākas ķermeņa daļas.

- Stingri piespiediet apstrādes virsmu (#6) pret ādu un lēnām slīdiet pa ādu (pāri vai uz leju, kā parādīts attēlā). Pārliecinieties, ka apstrādes virsma (#6) vienmēr pieskaras jūsu ādai.
- Pie zemāka enerģijas līmeņa ierīce uzlādējas starp impulsiem tikai 1-1,5 sekundēs. Tādējādi tiek ģenerēta nepārtraukta mirgošanas secība.

5. Iedarbība

5.1 Iedarbības plāns

Matu noņemšanas efektivitāte dažādiem cilvēkiem ir atšķirīga atkarībā no ķermeņa zonas, matu krāsas un ierīces lietošanas veida. Tipisks pilns matu augšanas cikls var ilgt 18-24 mēnešus. Šajā laikā, lai panāktu pastāvīgu matu mazināšanos, ir nepieciešamas vairākas iedarbības sesijas.

Tipisks matu noņemšanas plāns pilna matu augšanas cikla laikā ietver:

- Iedarbība 1-4: plānojiet divu nedēļu intervālu.
- Iedarbība 5-7: plānojiet četru nedēļu intervālu.
- Iedarbība 8+: apstrādājiet pēc vajadzības, līdz tiek sasniegti vēlamie rezultāti.

Ideālas ķermeņa zonas ir paduses, bikini zona, rokas, kājas, mugura, pleci un krūtis (izņemot krūtsgalus). Sejai izmantojiet zem vaigu kauliem, bet ne ap acīm vai lūpām.

Ādas tips 1	Ķermeņa mati 2	Gaismas Fluence [J/cm ²]	Ķermeņa daļa	Vidējais iedarbības laiks	Matu samazinājuma efektivitāte
1-5	Tumši blondi līdz brūni	2.5-4	Apakšējās vai augšējās kājas	Sesijas 10-12, apm. pēc 4 nedēļām	60%
			Rokas		50%
			Bikini līnija		60%
			Paduses		55%
1-5	Brūni līdz melni	2.5-4	Apakšējās vai augšējās kājas	Sesijas 8-10 apm. pēc 4 nedēļām	70%
			Rokas		60%
			Bikini līnija		70%
			Paduses		65%

1. Individuālā reakcija ir atkarīga no matu tipa, kā arī bioloģiskajiem faktoriem, kas var ietekmēt matu augšanas veidus. Daži lietotāji var reaģēt ātrāk vai lēnāk nekā vidējais procedūru skaits.
2. Nevar gaidīt pastāvīgu matu samazināšanos no vienas vai pat divām iedarbības sesijām. Matu folikulu atpūtas perioda ilgums ir atkarīgs arī no ķermeņa zonas.

5.2 Ko gaidīt, izmantojot ierīci

Iedarbības seansa laikā ir normāli izjust un sajūst:

- Ventilatora troksnis: Dzesēšanas ventilators rada troksni, kas līdzīgs matu žāvētāja skaņai.

<p>Paukšķēšanas skaņa ar katru impulsu: ja ir aktivizēts HPL gaismas impulss, ir normāli dzirdēt smalku paukšķēšanu vienlaikus ar gaismas zibni.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Siltuma un tirpšanas sajūta: katra gaismas impulsa laikā. ▪ Dažas maigi sarkanas vai rozā krāsas: iedarbības sesijas laikā un tūlīt pēc tās nav nekas neparasts redzēt ļoti maigu, rozā ādas krāsu. Tas parasti ir vairāk ievērojamākais ap pašiem matiem. <p>! Nekavējoties pārtrauciet lietošanu, ja redzat pilnīgu ādas apsārtumu, pūslīšu veidošanos vai apdegumus.</p> <p>5.3 Iespējamās blakusparādības</p> <p>Lietojot saskaņā ar instrukcijām, blakusparādības un komplikācijas, kas saistītas ar ierīces lietošanu, ir retums. Tomēr katra kosmētiskā procedūra, ieskaitot tās, kas paredzētas lietošanai mājās, ir saistīta ar zināmu risku. Tāpēc ir svarīgi, ka jūs saprotat un pieņemat riskus un komplikācijas, kas var rasties, ar pulsējošās gaismas matu noņemšanas sistēmu, kas paredzētas lietošanai mājās.</p> <p>Pastāv neliels risks, ka vairāku impulsu uzlikšana vai pārklāšanās vienā ādas vietā var radīt dažas nelabvēlīgas sekas.</p>	<p>Ādas apsārtums</p> <p>Jūsu āda var kļūt sarkana tūlīt pēc ierīces lietošanas vai 24 stundu laikā. Apsārtums parasti izzūd 24 stundu laikā.</p> <p>Apmeklējiet ārstu, ja apsārtums neizzūd 2 līdz 3 dienu laikā.</p> <p>Pārliecinieties, ka izmantojat enerģijas līmeni, kas jums ir ērts un piemērots jūsu ādas krāsai.</p>
<p>Neliels ādas diskomforts</p> <p>Mājas lietošanas pulsējošā vieglā matu noņemšana parasti ir labi panesama. Tomēr daži lietotāji lietošanas laikā izjūt vieglu diskomfortu. To vislabāk var raksturot kā vieglu dedzinošu sajūtu uz apstrādātajām ādas vietām. Sāpīga sajūta var ilgt iedarbības laikā vai pēc tās.</p> <p>Ja iedarbības laikā jūtat sāpes un ievērojamu ādas kairinājumu, samaziniet enerģijas līmeni. Ja tas nepalīdz, pārtrauciet iedarbību.</p>	<p>Pārmērīgs apsārtums un pietūkums</p> <p>Retos gadījumos apstrādāta āda var kļūt ļoti sarkana un uztūkt. Tas ir biežāk sastopams jutīgās ķermeņa vietās. Sarkanumam un pietūkumam vajadzētu izzust 2 līdz 7 dienu laikā, un tas jāārstē, bieži uzliekot ledu. Maiga tīrīšana ir piemērota, taču izvairieties no saules iedarbības.</p>
<p>Rētas</p> <p>Lai gan ļoti reti, var rasties rētas. Parasti rēta ir plakana un balta bojājuma veidā uz ādas (hipotrofiska). Tomēr tas var būt lielas un sarkanas (hipertrofiskas) vai lielas un paplašinātas pāri pašas traumas robežām (keloīds). Lai uzlabotu rētas izskatu, var būt nepieciešamas turpmākas estētiskās procedūras.</p>	<p>Paaugstināta ādas jutība</p> <p>Apstrādātās vietas āda ir jutīgāka, tāpēc jūs varat saskarties ar sausumu vai ādas lobīšanos.</p> <p>Tulznas vai apdegumi, ādas brūces</p> <p>Tas ir ļoti neparasti, bet pēc iedarbības var rasties pūslīši, apdegumi vai brūces uz ādas. To ārstēšana var prasīt dažas nedēļas, un ļoti retos gadījumos var atstāt ievērojamu rētu.</p> <p>Atdzesējiet skarto zonu un uzklājiet pret apdeguma krēmu. Pirms nākošās procedūras pagaidiet, līdz vieta ir pilnībā sadzijusi, un izmantojiet zemāku enerģijas līmeni.</p> <p>Ja āda 3 dienu laikā neatgriežas normālā stāvoklī, konsultējieties ar ārstu.</p>
<p>Pigmenta izmaiņas</p> <p>Ierīces mērķis ir matu kāts, jo īpaši pigmentētās šūnas matu folikulā un pašā matu folikulā. Tomēr pastāv īslaicīgas apkārtējās ādas hiperpigmentācijas (palielināta pigmenta vai brūnās krāsas izbalēšanas) vai hipopigmentācijas (balināšanas) risks. Ādas pigmentācijas izmaiņu risks ir lielāks cilvēkiem ar tumšāku ādas toni vai stipri iedegušu ādu. Parasti ādas krāsas maiņa vai izmaiņas ir īslaicīgas, un pastāvīga hiperpigmentācija vai hipopigmentācija ir reta.</p>	<p>Infekcija vai zilumi</p> <p>Ādas infekcija ir ārkārtīgi reti sastopama, taču joprojām pastāv zināms risks pēc ierīces izraisīta apdeguma vai brūces.</p> <p>Ļoti reti ierīce var izraisīt zili violetus zilumus, kas var ilgt 5 līdz 10 dienas. Zilumiem zūdot, var būt rūsganbrūna ādas krāsa (hiperpigmentācija).</p> <p>! Nekavējoties pārtrauciet lietošanu, ja kāda no šīm blakusparādībām ir vēl smagāka.</p> <p>! Apmeklējiet ārstu, ja blakusparādības neizzūd 2 līdz 3 dienu laikā.</p>

6. Ar ko sākt!

6.1 Ierīces savienošana

1. Izņemiet ierīci un citas sastāvdaļas no kastes.
2. Pievienojiet adapteri ierīces kontaktligzdai (#1) un pievienojiet adapteri elektrotīklam. Visi enerģijas līmeņa indikatori (#2) iedegas un pēc tam nodziest.

6.2 Sagatavošana pirms apstrādes

- ✓ Pirms lietošanas noņemiet visas rotaslietas uz apstrādes zonas vai tās tuvumā.
1. Pirms vietas apstrādes āda jānoskuj, tai jābūt tīrai, sausai un bez pulveriem, pretsviedru līdzekļiem vai dezodorantiem. Nevaksējiet, neplēšiet un nekniebiet matus.
 - ✓ Pirms lietošanas nekad neizmantojiet uzliesmojošus šķīdumus, piemēram, alkoholu (ieskaitot smaržas, dezinfekcijas līdzekļus vai citus, kas satur alkoholu) vai acetonu.
 - ✓ Nelietojiet ierīci, ja apstrādes virsma (#6) ir salauzta vai tās nav.
2. Noteikti nosedziet dzimumzīmes, kārpas vai citas zīmes uz ādas, kurām nevajadzētu iedarboties. Izmantojiet materiālu, kas neabsorbē gaismu, piemēram, baltu drānu vai baltu medicīnisko lenti.

6.3 Veiciet vietas pārbaudi

Jums jāizlemj, kurš enerģijas līmenis ir piemērots jūsu ādai un zona, kuru vēlaties apstrādāt. Piemēram, vienu zonu varat apstrādāt ar 1. enerģijas līmeni, bet otru ar - 4. līmeni.

Lai izvēlētos pareizo enerģijas līmeni, pārbaudiet katru apstrādes zonu atsevišķi (skatiet ādas krāsu tabulu šīs rokasgrāmatas sākumā).

Atkārtojiet vietas pārbaudi katrai ķermeņa daļai, uz kuru vēlaties iedarboties.

1. Nospiediet vadības pogu (#3), lai ieslēgtu ierīci. Iedegsies 1. līmeņa enerģijas līmeņa indikators (#2).
2. Novietojiet apstrādes virsmu (#6) uz ādas, lai raidītu vienu impulsu. Ja nejūtat neparastu diskomfortu, vēlreiz nospiediet vadības pogu (#3). Tas palielinās enerģijas līmeni. Raidiet vienu impulsu citā vietā 2. enerģijas līmenī.
3. Turpiniet testēšanu pie paaugstināta enerģijas līmeņa. Izmantojiet ādas krāsu tabulā norādītos enerģijas līmeņus. Kad esat atradis augstāko enerģijas līmeni, kas ir piemērots šai apstrādes zonai, varat sākt iedarbību.
 - ✓ Ja rodas diskomforts, izmantojiet zemāku enerģijas līmeni.

Tagad jūs esat gatavs veikt iedarbību.

6.4 Iedarbības soļi

1. Nospiediet vadības pogu (#3). Ierīce ieslēgsies, iedegsies 1. līmeņa enerģijas indikators (#2) un atskanēs ventilatora skaņa.
2. Pēc vadības pogas (#3) nospiešanas iedegsies gatavības indikators (#4). Pēc tam ierīce ir gatava lietošanai zemākajā enerģijas līmenī. Pirmajai procedūrai vienmēr sāciet ar 1. enerģijas līmeni.

3. Iestatiet enerģijas līmeni. Atkārtoti nospiediet vadības pogu (#3), lai palielinātu enerģijas līmeni, līdz iegūstat vēlamo līmeni. Enerģijas līmeņa indikatori (#2) norāda enerģijas līmeņa iestatījumu (sk. sadaļu 4.6. Enerģijas līmeņi). Iedegto enerģijas līmeņa indikatoru skaits (#2) norāda izvēlēto enerģijas līmeni.

4. Izlemiet, vai vēlaties apstrādāt zonu ar pulsāciju vai slīdēšanu (skatiet sadaļu 4.8 Pulsēšana un slīdēšana).
5. Uzlieciet apstrādes virsmu (#6) uz ādas. Pārlicinieties, ka āda ir vienmērīgi un vienmērīgi nosepta. Kad apstrādes virsma (#6) pilnībā saskaras ar ādu, gatavības indikators (#4) sāks lēni mirgot.
6. Ierīce vispirms automātiski noteiks jūsu ādas krāsu un gaisma mirgos uz ādas. Jūs sajutīsiet vieglu siltuma un tirpšanas sajūtu, un jūs varēsiet dzirdēt paukšķošu skaņu.
7. Ja jūtat pulsēšanu, noņemiet ierīci no ādas. Ierīce nekavējoties uzlādēs nākamo impulsu. Pēc dažām sekundēm (atkarībā no enerģijas līmeņa) gatavības indikators (#4) atkal iedegsies un sāks lēni mirgot, piespiests pret ādu.
8. Ja rodas pulss, atkārtojiet procedūru. Ja slidinat, vienkārši turpiniet. Turpiniet ar pulsēšanu vai slīdēšanu, līdz esat pilnībā apstrādājis zonu.
 - ✓ Izvairieties no spraugām vai pārklāšanās.
 - ✓ Ierīce izdos atkārtotus impulsus tikai tad, ja tā cieši saskaras ar ādu, un jūs to nepārtraukti pārvietojat pa ādu.

! Nekavējoties pārtrauciet lietošanu, ja uz ādas parādās pūslīši vai apdegumi, ja jūtat diskomfortu, vai ja ierīce kļūst pārāk karsta.

6.5 Pēc iedarbības



Kad esat pabeidzis iedarbības sesiju:












1. Ilgi nospiediet vadības pogu (#3), lai izslēgtu ierīci. Atcerieties pēdējo izmantoto enerģijas līmeņa iestatījumu, jo tas netiks atjaunots, atkal ieslēdzot ierīci.
2. Atvienojiet adapteri no strāvas padeves, pēc tam notīriet ierīci un glabājiet to drošā vietā (sk. 7. nodaļu. Tīrīšana, apkope un uzglabāšana).
3. Pēc iedarbības sesijas iesakām apstrādātajai zonai uzklāt ķermeņa losjonu, lai palīdzētu jūsu ādai ātrāk atgūties no procedūras.

7. Tīrīšana, apkope un uzglabāšana


Ir svarīgi tīrīt ierīci pēc katras apstrādes.

- Atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
- Lai notīrītu ierīci, ieskaitot apstrādes virsmu (#6), noslaukiet ar tīru, sausu drānu un 70% spirtu. Nekad neizmantojiet acetonu vai citus spodrināšanas šķīdumus, jo tie sabojās jūsu ierīci.
- Ierīces nožāvēšanai izmantojiet salveti.
- Pēc tīrīšanas ieteicams ierīci uzglabāt oriģinālajā kastē.

9. Klientu apkalpošana Plašāku informāciju skatiet mūsu vietnē: www.silkn.eu .		Transportēšana un uzglabāšana starp lietošanām un uzglabāšanas apstākļiem	Temperatūra: no -40 līdz +70 ° C Relatīvais mitrums: 10 līdz 90% Atmosfēras spiediens: no 500 līdz 1060 hPa
10. Garantija Lai iegūtu pilnīgu informāciju, lūdzu, skatiet atsevišķo izstrādājuma garantijas bukletu. <ul style="list-style-type: none"> Ražotājs neuzņemas atbildību par bojājumiem vai ievainojumiem, kas radušies nepiemērotas vai nepareizas lietošanas rezultātā. 		Ekspluatācijas apstākļi	Temperatūra: no 10 līdz 35 ° C. Relatīvais mitrums: 30 līdz 75% Atmosfēras spiediens: no 700 līdz 1060 hPa
11. Likvidēšana Ja ierīcei beidzas kalpošanas laiks, noteikti ievērojiet savas valsts likumus par elektrisko priekšmetu likvidēšanu.		Laiks no minimālās uzglabāšanas temperatūras starp lietošanas reizēm līdz minimālajai darbības temperatūrai ar apkārtējās vides temperatūru 20 ° C	30 minūtes
 Iepakojums: iznīciniet iepakojumu, kas sadalīts viena veida materiālos. Izmetiet kartonu kā makulatūru un plēvi, izmantojot pārstrādājamo materiālu savākšanas pakalpojumu.		Laiks no maksimālās uzglabāšanas temperatūras starp lietošanas reizēm līdz maksimālajai darbības temperatūrai ar apkārtējās vides temperatūru 20 ° C	30 minūtes
 Ierīce: Neizmetiet kopā ar sadzīves atkritumiem! WEEE direktīva paredz, ka šī elektroierīce (ieskaitot visus piederumus un detaļas) jāizmet noteiktā elektrisko ierīču savākšanas vietā. Tas nodrošina ierīces profesionālu pārstrādi un novērš kaitīgu vielu* nokļūšanu vidē. Pirms utilizācijas pārliedzinieties, ka ierīce ir neuzlādēta.		Darbības režīms	Nepārtraukts
* Produkti, kas marķēti ar Cd = kadmījs, Hg = dzīvsudrabs, Pb = svins.		Impulsa gaismas ilgums Atkārtojumu biežums	500-800µs Maksimums 0,7 Hz
12. Specifikācijas		Aizsardzība pret elektrisko šoku	II klases medicīniskā aprīkojuma tipa BF pielietotā daļa
Modeļa Nr.	JWX20PE3001	Adaptēra modeļi un klases	KSA24A1200150Hy Ja vēlaties, skatiet valsti / reģionu
Stara lielums	0.9cm x 3cm [2.7cm ²]	Ieeja Izeja	100-240V _{AC} , 50-60Hz, 0.5A 12V _{DC} , 1.5A
Tehnoloģija	Home Pulsed Light™	Paredzamais ierīces mūža ilgums	5 gadi
Maksimālais enerģijas līmenis	Max 4J/cm ²	Pulsa parametri (sekundes)	Enerģijas līmenis 1: 1,5 Enerģijas līmenis 2: 2,0 Enerģijas līmenis 3: 2,5 Enerģijas līmenis 4: 3.0 Enerģijas līmenis 5: 3.5
Viļņu garums	475-1200nm		
Darbība un drošība	Ādas krāsas sensors nodrošina lietošanu atbilstošiem ādas tipiem		
Sistēmas svars	200g		

13. Zīmes un simboli		15. Tehniskie rezultāti																																			
	Paziņojums vai notikums, kas norāda uz iespējamām vai gaidāmām briesmām, problēmām vai citu nepatīkamu situāciju, lietojot ierīci.	EMC prasības IEC 60601-1-2, 4. izdevums (2014) Paredzētā lietojuma vide: Mājas veselības aprūpes iestādes vide <u>Testa rezultātu kopsavilkums</u>																																			
	Produkti, kas apzīmēti ar šo simbolu, atbilst ES direktīvu prasībām.																																				
	Neizmetiet kopā ar sadzīves atkritumiem. Utilizējiet saskaņā ar savas valsts likumiem un palīdziet aizsargāt vidi. Saskaņā ar WEEE direktīvu.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tests</th> <th>Standarts</th> <th>Klase/ smaguma pakāpe</th> <th>Testa rezultāts</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Emisija (IEC 60601-1-2, sadaļa 7)</td> </tr> <tr> <td>Izstarotā emisija Frekvences diapazons: 30-1000 MHz</td> <td>CISPR 11</td> <td>Grupa 1, klase B</td> <td>Atbilst</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Imunitāte (IEC 60601-1-2, sadaļa 8)</td> </tr> <tr> <td>Imunitāte pret elektrostātisko izlādi (ESD)</td> <td>IEC 61000-4-2</td> <td>8 kV kontakta izlāde un 15 kV gaisa izplūde</td> <td>Atbilst</td> </tr> <tr> <td>Imunitāte pret elektromagnētisko lauku izstarošanu</td> <td>IEC 61000-4-3</td> <td>3.0; 10.0 V/m; 80 MHz 2.7 GHz, 80% AM, 1 kHz</td> <td>Atbilst</td> </tr> <tr> <td>Imunitāte pret bezvadu sakaru aprīkojuma tuvā lauka</td> <td>IEC 61000-4-3</td> <td>Frekvenču saraksts, no 9 V/m līdz 28 V/m, PM (18 Hz vai 217 Hz), FM 1 kHz</td> <td>Atbilst</td> </tr> <tr> <td>Imunitāte pret elektrības magnētiskā lauka frekvenci</td> <td>IEC 61000-4-8</td> <td>30 A/m @ 50 Hz</td> <td>Atbilst</td> </tr> </tbody> </table>				Tests	Standarts	Klase/ smaguma pakāpe	Testa rezultāts	Emisija (IEC 60601-1-2, sadaļa 7)				Izstarotā emisija Frekvences diapazons: 30-1000 MHz	CISPR 11	Grupa 1, klase B	Atbilst	Imunitāte (IEC 60601-1-2, sadaļa 8)				Imunitāte pret elektrostātisko izlādi (ESD)	IEC 61000-4-2	8 kV kontakta izlāde un 15 kV gaisa izplūde	Atbilst	Imunitāte pret elektromagnētisko lauku izstarošanu	IEC 61000-4-3	3.0; 10.0 V/m; 80 MHz 2.7 GHz, 80% AM, 1 kHz	Atbilst	Imunitāte pret bezvadu sakaru aprīkojuma tuvā lauka	IEC 61000-4-3	Frekvenču saraksts, no 9 V/m līdz 28 V/m, PM (18 Hz vai 217 Hz), FM 1 kHz	Atbilst	Imunitāte pret elektrības magnētiskā lauka frekvenci	IEC 61000-4-8	30 A/m @ 50 Hz	Atbilst
Tests	Standarts	Klase/ smaguma pakāpe	Testa rezultāts																																		
Emisija (IEC 60601-1-2, sadaļa 7)																																					
Izstarotā emisija Frekvences diapazons: 30-1000 MHz	CISPR 11	Grupa 1, klase B	Atbilst																																		
Imunitāte (IEC 60601-1-2, sadaļa 8)																																					
Imunitāte pret elektrostātisko izlādi (ESD)	IEC 61000-4-2	8 kV kontakta izlāde un 15 kV gaisa izplūde	Atbilst																																		
Imunitāte pret elektromagnētisko lauku izstarošanu	IEC 61000-4-3	3.0; 10.0 V/m; 80 MHz 2.7 GHz, 80% AM, 1 kHz	Atbilst																																		
Imunitāte pret bezvadu sakaru aprīkojuma tuvā lauka	IEC 61000-4-3	Frekvenču saraksts, no 9 V/m līdz 28 V/m, PM (18 Hz vai 217 Hz), FM 1 kHz	Atbilst																																		
Imunitāte pret elektrības magnētiskā lauka frekvenci	IEC 61000-4-8	30 A/m @ 50 Hz	Atbilst																																		
	Izpildiet lietošanas instrukcijas.																																				
	Aizsardzības pakāpe pret elektriskās strāvas triecienu: BF tipa detaļa.																																				
	Turiet sausu.																																				
	Izgatavošanas datums.																																				
	Ražotājs.																																				
	ES pilnvarotais pārstāvis.																																				
	Produkta sērijas numurs.																																				
IP30	Ierīce ir aizsargāta pret priekšmetu, kuru diametrs ir lielāks par 2,5 mm, piemēram, pirkstiem, iekļūšanu, lai pasargātu no elektriskās strāvas trieciena.																																				
	II klase. Adapteris ir aizsargāts pret elektriskās strāvas triecienu, izmantojot dubultu izolāciju.																																				

14. Marķēšana

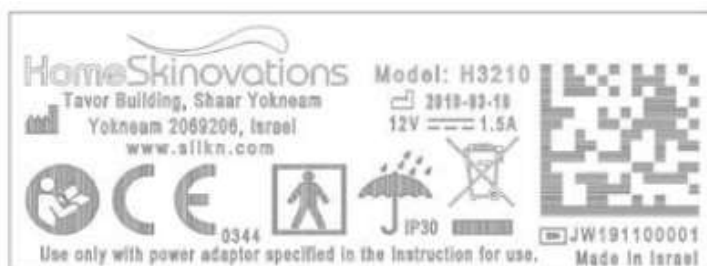

16. Juridisks ziņojums

Autortiesības 2020 © Home Skinovations Ltd. Visas tiesības aizsargātas.

Home Skinovations Ltd patur tiesības veikt izmaiņas savos produktos vai specifikācijās, lai uzlabotu veiktspēju, uzticamību vai ražojamību. Tiek uzskatīts, ka Home Skinovations Ltd sniegtā informācija publicēšanas laikā ir precīza un uzticama. Tomēr Home Skinovations Ltd neuzņemas nekādu atbildību par tā izmantošanu. Neviena licence netiek piešķirta netieši vai citādi saskaņā ar Home Skinovations Ltd. patentiem vai patenta tiesībām. Nevienu šī dokumenta daļu nedrīkst reproducēt vai pārsūtīt nekādā veidā vai ar jebkādiem elektroniskiem vai mehāniskiem līdzekļiem jebkādiem mērķiem bez Home Skinovations Ltd. nepārprotamas rakstiskas atļaujas. Dati var tikt mainīti bez brīdinājuma. Home Skinovations Ltd pieder patenti un patentu pieteikumi, preču zīmes, autortiesības vai citas intelektuālā īpašuma tiesības, kas attiecas uz šī dokumenta tēmu. Šī dokumenta izsniegšana nedod jums nekādas tiesības uz šiem patentiem, preču zīmēm, autortiesībām vai citām intelektuālā īpašuma tiesībām, izņemot gadījumus, kas skaidri paredzēti jebkurā Home Skinovations Ltd. rakstiskā līgumā. Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma. Silk'n un Silk'n logotips ir Home Skinovations Ltd, Tavor Building, Shaar Yokneam P.O. reģistrētas preču zīmes. Pastkaste 533, Yokneam 2069206, IZRAĒLA.