








PHILIPS

DiamondClean

9000



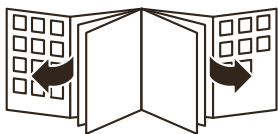

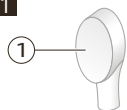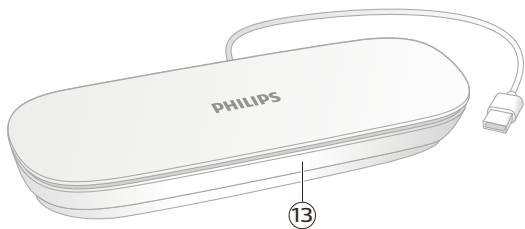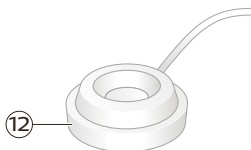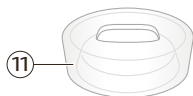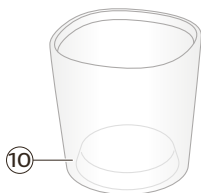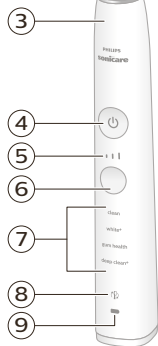1**2**

levads

Apsveicam ar jaunas Philips Sonicare elektriskās zobu sukuas iegādi! Jūsu rokās ir labākais līdzeklis zobu aplikuma noņemšanai, kā arī baltāku zobu un veselīgāku smaganu iegūšanai. Izmantojot Sonicare maigās Sonic tehnoloģijas kombināciju ar klīniski izstrādātām un apstiprinātām funkcijām, jūs varat būt pārliecināts, ka ikreiz saņemat vislabāko zobu tīrīšanu. Turpmāka atbalsta saņemšanai un produkta reģistrācijai izmantojiet šo tīmekļa vietni:

<http://www.philips.com/welcome>.

Sveicināti Philips Sonicare saimē!

Paredzētā lietošana

DiamondClean sērijas elektriskās zobu sukuas ir paredzētas aplikuma un ēdiena palieku notīrīšanai no zobiem, lai samazinātu zobu bojāšanās risku un uzlabotu un saglabātu mutes dobuma veselību. DiamondClean sērijas elektriskās zobu sukuas ir paredzētas lietošanai mājas apstākļos. Bērniem tās jālieto pieaugušo uzraudzībā.

Svarīga informācija par drošību

Pirms ieīces lietošanas rūpīgi izlasiet šo svarīgo informāciju un saglabājiet to, lai vajadzības gadījumā varētu ieskatīties tajā arī turpmāk.

Piezīme. Piederumi un funkcijas dažādiem modeļiem var atšķirties. Piemēram, daži modeļi komplektā var būt dezinficētājs vai arī tie var būt aprīkoti ar Bluetooth funkciju.

Bīstami

- Sargiet lādētāju un/vai dezinficētāju no ūdens. Nenovietojiet un neglabājiet ierīci vietā, kur tā var iekrist vai tikt ierauta vannā vai izlietnē.

- Neiegremdējiet lādētāju un/vai dezinficētāju ūdenī vai citā šķidrumā.
- Pēc tīršanas pārlicinieties, ka lādētājs un/vai dezinficētājs ir pilnībā sauss, pirms pievienojat to sienas kontaktligzdai.

Brīdinājums

- Šo ierīci var izmantot bērni un personas ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja tiek nodrošināta uzraudzība vai norādījumi par drošu ierīces lietošanu un panākta izpratne par iespējamo bīstamību. Bērni bez uzraudzības nedrīkst tīrīt ierīci vai veikt tās tehnisko apkopi.
- Bērni nedrīkst rotaļāties ar ierīci.
- Ja kāda ierīces detaļa (zobu birstes uzgalis, rokturis, lādētājs un/vai dezinficētājs) ir bojāta, pārtrauciet lietot ierīci.
- Strāvas vadu nav iespējams nomainīt. Ja strāvas vads ir bojāts, izmetiet lādētāju un/vai dezinficētāju.
- Vienmēr nomainiet lādētāju un/vai dezinficētāju pret oriģinālā tipa ierīci, lai izvairītos no bīstamām situācijām.

- Šai ierīcei nav daļu, kuru apkopi var veikt lietotājs. Ja ierīce ir bojāta, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru savā valstī (sk. 'Garantija un atbalsts').
- Neglabājiet strāvas vadu karstu virsmu tuvumā.
- Neizmantojiet lādētāju un/vai dezinficētāju ārpus telpām vai karstu virsmu tuvumā.

Ievērošanai

- Nemazgājiet suku uzgali, rokturi, lādētāju, lādētāja vāciņu vai dezinficētāju trauku mazgāšanas mašīnā.
- Ja pēdējo divu mēnešu laikā jums ir bijušas mutes vai smaganu operācijas, pirms šīs ierīces lietošanas konsultējieties ar zobārstu.
- Konsultējieties ar zobārstu, ja pēc šīs ierīces lietošanas sākas intensīva asiņošana vai ja asiņošana turpinās pēc 1 nedēļu ilgas lietošanas. Tāpat konsultējieties ar zobārstu, ja izjūtat diskomfortu vai sāpes, izmantojot šo ierīci.

- Šī „Philips” ierīce atbilst elektromagnētisko ierīču drošības standartiem. Ja jums ir elektrokardiostimulators vai cita implantēta ierīce, pirms lietošanas konsultējieties ar ārstu vai implantētās ierīces ražotāju.
- Ja jums radušās medicīniska rakstura šaubas, pirms šīs ierīces lietošanas konsultējieties ar ārstu.
- Šī ierīce ir paredzēta tikai zobu, smaganu un mēles tīrīšanai. Neizmantojiet to citādi. Pārtrauciet lietot ierīci un sazinieties ar ārstu, ja rodas diskomforts vai sāpes.
- Šī ir personīgās higiēnas ierīce, un tā nav paredzēta lietošanai vairākiem pacientiem zobārstniecības praksē vai iestādē.
- Lietojiet tikai Philips Sonicare ieteiktos suku uzgaļus.
- Pārtrauciet lietot suku uzgali, ja tās sari ir saspiesti vai saliekti. Nomainiet suku uzgali ik pēc 3 mēnešiem vai agrāk, ja tam ir redzamas nolietojuma pazīmes.

- Ja jūsu zobu pastas sastāvā ir ūdeņraža pārskābe, cepamā soda vai bikarbonāts (bieži sastopams balinošajās zobu pastās), rūpīgi iztīriet sukas uzgali ar ziepēm un ūdeni pēc katras lietošanas reizes. Tā novērsīsiet iespējamu plastmasas saplaisāšanu.
- Izvairieties no tieša kontakta ar produktiem, kuru sastāvā ir ēteriskās eļļas vai kokosriekstu eļļa. Kontakts var samazināt produkta kalpošanas ilgumu.

Elektromagnētiskie lauki (EML)

Šī Philips ierīce atbilst visiem piemērojamajiem standartiem un noteikumiem, kas attiecas uz elektromagnētisko lauku iedarbību.

Radioiekārtu direktīva

Ar šo Philips paziņo, ka elektriskās zobu birstes ar radiofrekvences saskarni (Bluetooth) atbilst direktīvai 2014/53/ES.

ES atbilstības deklarācijas pilnais teksts ir pieejams šeit:

www.philips.com/support

Šajā ierīcē izmantotā radiofrekvence ir 13,56 MHz.

Šīs ierīces pārraidītās radiofrekvences maksimālā jauda ir 30,16 dBm.

Philips Sonicare lietošana (1. attēls)

- 1 Higiēnisks ceļojuma vāciņš
- 2 Viedie sukas uzgaļi*
- 3 Rokturis
- 4 Ieslēgšanas/izslēgšanas poga
- 5 Intensitātes indikators
- 6 Režīms/intensitātes taustiņš

- 7 Režīmi
- 8 Sukas uzgaļa maiņas atgādinājuma indikators.
- 9 Baterijas rādījumi
- 10 Uzlādes glāze
- 11 Uzlādes statīvs
- 12 Uzlādes pamatne
- 13 (Uzlādes) ceļojumu ietvars*
- 14 USB sienas adapteris*

* Piezīme. Iepakojuma saturs var atšķirties atkarībā no iegādātā modeļa.

Sonicare lietojumprogramma – darba sākšana

Sonicare lietojumprogramma savienojas pārī ar jūsu zobu suku, lai nodrošinātu jums pārbaudītu pieredzi. Saistot zobu suku ar savu Sonicare lietojumprogrammas kontu, jūs varēsiet:

- viegli pārskatīt savu progresu ziņojumu, lai uzzinātu, kā uzlabot savu zobu tīrīšanas rutīnu;
- saņemt personalizētus padomus un rekomendācijas mutes dobuma veselības nodrošināšanai.

Lai sāktu izmantot Sonicare lietojumprogrammu:

- 1** lejupielādējiet savā tālrunī Sonicare lietojumprogrammu;
- 2** atveriet lietojumprogrammu un sekojiet norādītajām darbībām;
- 3** savienojiet savu zobu suku pārī ar lietojumprogrammu;
- 4** izveidojiet savu kontu;
- 5** ja tiek pieprasīts, pilnībā atjauniniet programmaparatūru, lai piekļūtu jaunākajiem uzlabojumiem un funkcijām;
- 6** tīriet zobus regulāri;

Jūs esat gatavs sākt savienojumu. Pārliecinieties, ka tīrāt zobus regulāri. Jūs varat saņemt atjauninājumus, kas palīdzēs uzlabot mutes dobuma veselību.

Piezīme. Pārliecinieties, vai tālruņa Bluetooth ir ieslēgts, izmantojot šo lietojumprogrammu. Jūsu zobu suka izmanto Bluetooth savienojumu, lai pārsūtītu jūsu zobu tīrīšanas datus uz lietojumprogrammu. Ja jums ir jautājumi par to, kādēļ tiek iegūti jūsu zobu tīrīšanas dati, pārskatiet

Sonicare konfidencialitātes ziņojumu, kas pieejams lietojumprogrammas iestāšanās procesā.

Sonicare lietojumprogramma — izsekojiet un uzlabojiet mutes dobuma veselības aprūpi

Jūsu Sonicare elektriskā zobu suka ir aprīkota ar viediem sensoriem, lai sniegtu jums atgriezenisko saiti par jūsu zobu tīrīšanas ieradumiem, tostarp:

- par ikdienas zobu tīrīšanas reizēm;
- par laiku, kas pavadīts katrā zobu tīrīšanas reizē;
- par pielietoto zobu tīrīšanas spiedienu;
- Atgādinājums par sukas uzgaļa nomaiņu (pamatojoties uz faktisko lietojumu)

Sonicare lietojumprogramma ar viedo sensoru palīdzību iegūst datus un laika gaitā nosaka jūsu zobu tīrīšanas ieradumus.

Katra lietojumprogrammā pieejamā funkcija ir izveidota tā, lai palīdzētu jums izprast jūsu zobu tīrīšanas ieradumus un sniegtu jums vienkāršus ieteikumus, kā uzlabot un saglabāt sava mutes dobuma veselību. Sonicare lietojumprogrammā jūs saņemsiet personalizētu zobu tīrīšanas informāciju.

Sukas uzgaļi

Lai redzētu, kāda veida sukas uzgalis jums ir, aplūkojiet sukas uzgaļa apakšpusē esošo marķējumu. Simbols sukas uzgaļa apakšpusē norāda, ka tas ir viedais sukas uzgalis, kas aprīkots ar BrushSync tehnoloģiju.

Piezīme. Iepakojuma saturs var atšķirties atkarībā no iegādātā modeļa.




Sukas uzgaļa nosaukums	Premium Plaque Control	Premium White	Premium Gum Care
Sukas uzgaļa marķējums	C3	W3	G3
Ieguvumi	Aplikuma noņemšana	Aplikuma un traipu noņemšana	Veselīgākas smaganas

Lai iepazītos ar mūsu zobu suku uzgaļu plašo klāstu, apmeklējiet tīmekļa vietni www.philips.com/toothbrush-heads.

Philips Sonicare lietošana

Zobu tīrīšanas norādījumi

- 1 Stingri uzbīdīet suku uzgali rokturim. Samitriniet sarus un uzklājiet zobu pastu.


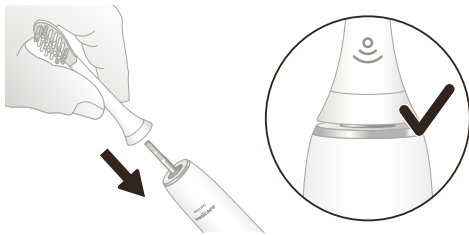


Piezīme. Parasti ir redzama neliela atstarpe starp suku uzgali un rokturi. Tā ļauj suku uzgalim brīvi vibrēt.


- 2 Novietojiet zobu suku sarus pret zobiem nelielā leņķī (45 grādi), viegli piespiediet, lai sari sniegtos līdz smaganu līnijai vai mazliet zem tās.

Piezīme. Visu laiku saglabājiet suku galviņu saskarē ar zobiem.

- 3 Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai ieslēgtu ierīci Philips Sonicare.

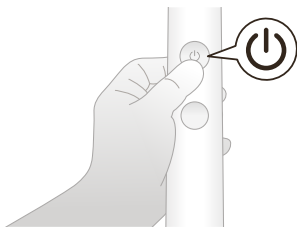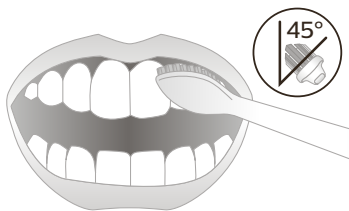


- 4 Mazliet uzspiediet, lai palielinātu Philips Sonicare efektivitāti, un ļaujiet Philips Sonicare zobu birstei tīrīt zobus jūsu vietā. Saudzīgi un lēni virziet suku uzgali gar zobiem, veicot nelielas kustības uz priekšu un atpakaļ, lai garākie sari aizsniegtos starp zobiem. Turpiniet šo kustību visā zobu tīrīšanas ciklā.

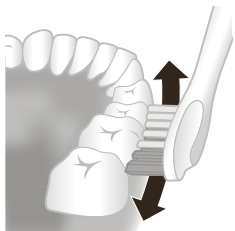

Piezīme. Ir pieejami (sk. 'Zobu tīrīšanas režīmi') vairāki režīmi.

- 5 Lai iztīrītu priekšzobu iekšējās virsmas, daļēji paceliet birstes rokturi uz augšu un veiciet vairākas vertikālas tīrīšanas kustības uz katra zoba.

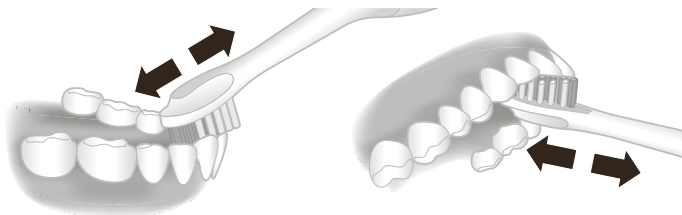

Piezīme.

- Roktura vibrācijas izmaiņas brīdina, ja tīrāt ar pārāk lielu spiedienu (sk. 'Spiediena sensors').
- Philips Sonicare zobu suku varat droši izmantot, ja jums ir breketes, veikta zobu līdzināšana vai labojumi (plombas, kronīši, venīri).
- Neizmantojiet elektrisko zobu suku dušā.

BrushSync tehnoloģija

BrushSync tehnoloģija nodrošina suku uzgaļu saziņu ar rokturi, izmantojot mikroshēmu. Simbols suku uzgaļa apakšpusē norāda, ka tas ir aprīkots ar BrushSync tehnoloģiju. Tā nodrošina šādas iespējas:

- Sukas uzgaļa režīmu savienošana pārī
- Sukas uzgaļa maiņas atgādinājuma indikators

Zobu tīrīšanas režīmi

Jūsu elektriskā zobu suka var būt aprīkota ar 4 dažādiem tīrīšanas režīmiem: tīrīšanas, balināšanas, smaganu veselības un rūpīgas tīrīšanas režīms.

Pamatojoties uz jūsu izmantoto viedo suku galviņu, BrushSync tehnoloģija automātiski izvēlas optimālo režīmu un intensitāti.

Lai manuāli mainītu režīmu, nospiediet režīma/intensitātes pogu, kamēr zobu suka ir izslēgta, kad ir pievienota suku galviņa.



* Piezīme.

- Visi suku uzgaļi darbojas katrā režīmā.
- Izmantojot Philips Sonicare zobu suku klīniskos pētījumos, tā jālieto augstas intensitātes tīrīšanas režīmā ar izslēgtu EasyStart funkciju.

Sukas uzgaļa režīmu savienošana pārī

Sukas uzgaļi ar BrushSync tehnoloģiju ir aprīkoti ar mikroshēmu, kas nodrošina saziņu ar rokturi un automātiski sapāro to ar ieteicamo režīmu un tīrīšanas intensitāti.

Piezīme. Ja jūs maināt režīmus/intensitāti, suku uzgalis atcerēsies pēdējo izmantoto iestatījumu. Ja vēlaties tīrīt zobus ar ieteicamo režīmu/intensitāti, to varat atrast nodaļā "Tīrīšanas režīmi".

Sukas uzgaļa režīmu savienošana pārī


Sukas uzgaļi ar BrushSync tehnoloģiju ir aprīkoti ar mikroshēmu, kas nodrošina saziņu ar rokturi un automātiski sapāro to ar ieteicamo režīmu un tīrīšanas intensitāti.

Piezīme. Ja jūs maināt režīmus/intensitāti, suku uzgalis atcerēsies pēdējo izmantoto iestatījumu. Ja vēlaties tīrīt zobus ar ieteicamo režīmu/intensitāti, to varat atrast turpmāk ievietotajā tabulā.


	Tīrīšana un Rūpīga tīrīšana	Balināšana+	Smaganu veselība
Ieguvumi	Aplikuma noņemšana	Aplikuma un traipu noņemšana no zobu virsmas	Aplikuma noņemšana un smaganu masāža
Ieteicamais sukas uzgalis	Premium Plaque Control (C3)	Premium White (W3)	Premium Gum Care (G3)
Ieteicamais intensitātes līmenis	3	3	3
Kopējais zobu tīrīšanas laiks	Tīrīšana: 2 minūtes Rūpīga tīrīšana: 3 minūtes*	2 minūtes un 40 sekundes	3 minūtes un 20 sekundes

**Tīršana un
Rūpīga tīršana**
Balināšana+
**Smaganu
veselība**
Kā tīrīt


Tīršana: tīriet
katru segmentu
20 sekundes.

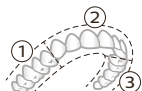


Rūpīga tīršana:
tīriet katru
segmentu
30 sekundes*

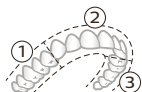


Tīriet katru
segmentu
20 sekundes,

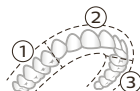

pēc tam tīriet
7. un
8. segmentu –
katru
20 sekundes
ilgi.

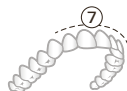

Tīriet katru
segmentu
20 sekundes,

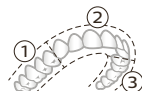

pēc tam tīriet
7., 8., 9. un
10. segmentu –
katru
20 sekundes
ilgi.



* Piezīme: Tīrot ar lietojumprogrammu Sonicare režīmā “rūpīga tīršana+”, tīršanas laiks būs 2 minūtes.

Intensitātes iestatījumi


Jūsu elektriskā zobu suka ir aprīkota ar 3 dažādiem intensitātes iestatījumiem:

- zema intensitāte (viens stabīņš)
- vidēja intensitāte (divi stabīņi)

- augsta intensitāte (trīs stabīņi)

Kad viedais suku uzgalis tiek pievienots rokturim, tas automātiski izvēlas ieteicamo intensitāti. Lai manuāli nomainītu intensitāti, ieslēdziet rokturi un nospiediet režīma/intensitātes pogu.

Kamēr zobu suka ir ieslēgta, nospiediet šo pogu, lai mainītu intensitātes iestatījumu.

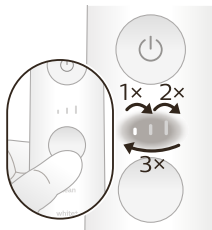

Funkcijas

- BrushPacer
- Spiediena sensors
- Sukas uzgaļa maiņas atgādinājuma indikators
- EasyStart

BrushPacer

BrushPacer funkcija ar īslaicīgu vibrācijas maiņu norāda, kad jāpāriet uz nākamā zobu segmenta tīrīšanu.

Tīrīšanas cikla beigās zobu suka automātiski izslēdzas.

Spiediena sensors

Jūsu Philips Sonicare zobu suka mēra spiedienu, ar kādu jūs tīrāt zobus, lai pasargātu jūsu zobus un smaganas no bojājuma.

Ja jūs lietojat pārāk lielu spiedienu, roktura vibrācijas mainīsies, līdz jūs samazināsiet lietoto spiedienu.

Piezīme. Iegādājoties šo produktu, spiediena sensora funkcija ir aktivizēta. Lai deaktivizētu šo funkciju, skatiet nodaļu "Funkciju aktivizēšana vai deaktivizēšana".

Sukas uzgaļa maiņas atgādinājuma indikators

Laika gaitā rokturis noteiks jūsu viedā suku uzgaļa nolietojumu, mērot:

- kopējo spiedienu, ko jūs lietojat zobu tīrīšanas laikā;
- kopējo laiku, kad esat tīrījis zobus ar suku uzgali.

Tiklīdz suku galviņa vairs nebūs efektīva, tās nomaiņas atgādinājums mirgos dzintara krāsā un rokturis pīkstēs.



Piezīme. Iegādājoties šo produktu, suku galviņas nomaiņas atgādinājums ir aktivizēts. Lai deaktivizētu šo funkciju, skatiet nodaļu "Funkciju aktivizēšana vai deaktivizēšana".

EasyStart

EasyStart funkcija pakāpeniski palielina roktura jaudu pirmo 14 tīrīšanas reižu laikā, lai jūs pierastu pie Philips Sonicare tīrīšanas spēka.


EasyStart funkcija darbojas visos režīmos.

Piezīme. Iegādājoties šo produktu, EasyStart funkcija ir deaktivizēta. Lai ieslēgtu EasyStart funkciju, skatiet nodaļu "Funkciju aktivizēšana vai deaktivizēšana".


Akumulatora statuss un uzlādēšana

Uzlādēšana lādētāja pamatnē

- 1 Pievienojiet lādēšanas pamatnes vadu elektrības kontaktligzdai.
- 2 Novietojiet lādēšanas statīvu vai lādēšanas trauku uz lādēšanas pamatnes.

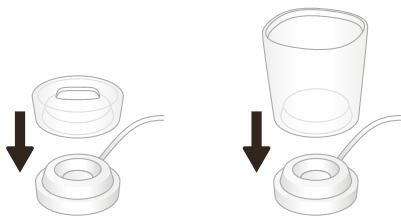

3 Novietojiet rokturi uz lādēšanas stāva vai lādēšanas traukā.

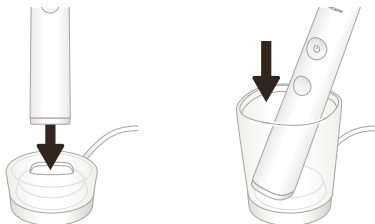

4 Lādētājs veiks zobu suku uzlādi, kamēr tā būs pilnībā uzlādēta. Rokturis tiek uzlādēts, kad akumulatora indikators mirgo baltā krāsā. Kad rokturis lādētājā ir pilnībā uzlādēts, akumulatora indikators deg baltā krāsā 30 sekundes un tad izslēdzas.

Piezīme. Pirmajai lietošanas reizei zobu suku rokturis tiek piegādāts uzlādēts. Pēc pirmās lietošanas reizes uzlādējiet vismaz 24 stundas.

Uzlāde ar ceļojumu futrāli*

* Piezīme: Atkarībā no iegādātā modeļa ceļojuma futrālis ar uzlādes funkciju var nebūt iekļauts.

- 1** Izņemiet USB kabeli no ceļojuma futrāļa uzlādēšanas apakšas.
- 2** Pievienojiet uzlādes ceļojuma futrāli 5 V līdzstrāvas ieejas jaudas avotam, izmantojot vienu no šādām iespējām:
 - pievienoto USB adapteri;
 - UL sarakstā esošu vai ANSI/UL 60950-1 sertificētu personālā datora standarta USB savienotāju;

- UL sarakstā esošu vai ANSI/UL 60950-1 sertificētu LPS strāvas avotu ar USB izvades portu;
- UL sarakstā esošu vai 1310 sertificētu 2. klases strāvas avotu.

Svarīgi! Sienas adapterim jābūt drošam strāvas avotam ar īpaši zemu spriegumu un jāatbilst elektrības parametriem, kas norādīti ierīces apakšpusē.

3 Ceļojuma futrālis veiks zobu suku uzlādi, kamēr tā būs pilnībā uzlādēta.

Akumulatora statuss (rokturis uz strāvas avotam pievienota lādētāja)

Kad rokturis ir novietots lādētājā vai ceļojuma futrālī, akumulatora indikators paziņo akumulatora līmeni.

Akumulatora statuss	Baterijas rādījumi
Uzlāde	Mirgo baltā krāsā
Uzlādēts	Mirgo baltā krāsā 30 sekundes un tad izslēdzas.

Akumulatora statuss (kad rokturis nav novietots uz lādētāja)

Ieslēdzot rokturi, akumulatora indikators roktura apakšā norāda akumulatora statusu.

Akumulatora statuss	Baterijas rādījumi	Skaņa
Uzlādēts	Iedegas baltā krāsā	-
Daļēji uzlādēts	Mirgo baltā krāsā	-
Reti	Mirgo dzintara krāsā	Rokturis pīkst 3 reizes
Tukšs	Mirgo dzintara krāsā	Rokturis pīkst 2 reizes pa 5 pīkstieniem

Funkciju aktivizēšana vai deaktivizēšana

Jūs varat aktivizēt vai deaktivizēt tālāk norādītās zobu suku funkcijas.

- EasyStart
- Sukas uzgaļa maiņas atgādinājuma indikators
- Spiediena sensors

1. solis: Novietojiet rokturi uz lādēšanas statīva vai lādēšanas traukā.



2. solis: nospiediet un turiet nospiestu ieslēgšanas pogu, lai aktivizētu vai deaktivizētu:

Easy start funkciju

Sukas uzgaļa maiņas atgādinājuma indikators

Spiediena sensors

3 sekundes

Līdz 5 sekundēm

Līdz 7 sekundēm



3. solis: atlaidiet ieslēgšanas pogu, kad izdzirdat

1 skaņas signālu

1 un pēc tam 2 skaņas signālus

1 skaņas signālu, 2 skaņas signālus un pēc tam 3 skaņas signālus



Ja redzat, ka akumulatora indikators mirgo 2 reizes un dzirdat 3 toņus no zema līdz augstam, funkcija ir aktivizēta.

VAI




Ja redzat, ka akumulatora indikators mirgo vienu reizi un dzirdat 3 toņus no augsta līdz zepam, funkcija ir deaktivizēta.

Tīrīšana


- Visas detaļas var tīrīt ar mitru drānu vai noskalot ar siltu ūdeni.




- Noņemiet zobu suku uzgali no roktura un rūpīgi noskalojiet to.

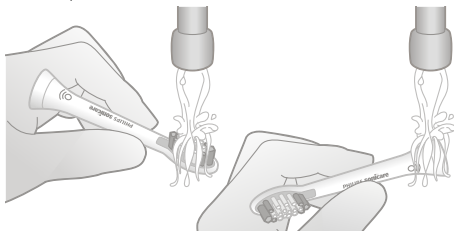

- Vismaz reizi nedēļā noskalojiet visu rokturi, it īpaši zobu suku uzgaļa savienojuma vietu.

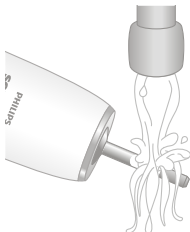

levērbai! Nepielietojiet spiedienu uz gumijas blīves roktura augšpusē. Uzmanīgi notīriet apkārt gumijas blīvei.

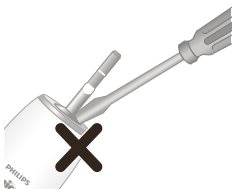

Brīdinājumi:

- Nemazgājiet suku galviņu, ceļojuma vāciņu, rokturi, lādētāju vai ceļojuma futrāli trauku mazgājamajā mašīnā.
- Roktura tīrīšanai neizmantojiet izopropilspirtu, etiķi, balinātāju vai jebkuru citu mājsaimniecības tīrīšanas līdzekli, jo virsmas materiāls var zaudēt krāsu.
- Pirms lādētāja tīrīšanas atvienojiet to no strāvas.
- Zobu suku uzgaļu tīrīšanai neizmantojiet ēteriskās eļļas, jo ierīce var tikt bojāta.

Glabāšana

Ja negrasāties izmantot ierīci ilgāku laika periodu, atvienojiet to no elektriskās strāvas, notīriet un uzglabājiet to vēsā un sausā vietā, kas nav pakļauta tiešas saules gaismas iedarbībai.

Biežāk uzdotie jautājumi

Jautājums

Atbilde

Vai starp zobu tīrīšanas reizēm es varu atstāt savu Sonicare zobu suku uz lādētāja?

Jā, jūs vienmēr varat turēt savu Philips Sonicare zobu suku uz strāvas avotam pievienota lādētāja. Tas neietekmē akumulatora kalpošanas laiku.

Jautājums

Atbilde

Vai citi zobu suku uzgaļi derēs manai Philips Sonicare zobu sukai?

Visi Philips Sonicare elektriskās zobu suku uzspraužamie uzgaļi derēs jūsu zobu sukai. Tomēr ne visi ir aprīkoti ar BrushSync tehnoloģijām. Jūs varat identificēt ar BrushSync tehnoloģiju aprīkotos zobu suku uzgaļus pēc ikonas uzgaļa apakšpusē.

Cik bieži man ir jānomaina zobu suku uzgalis?

Mēs iesakām nomainīt Philips Sonicare suku galviņu pēc 3 mēnešu lietošanas (atkarībā no tā, vai katru sesiju divas reizes dienā iztīrītu 2 minūtes). Suku galviņas nomaiņas atgādinājums arī paziņos, kad pienācis laiks to nomainīt.

Vai mana Philips Sonicare zobu suka ir ūdensizturīga?

Jā, jūsu Philips Sonicare zobu suka ir ūdensizturīga. Tomēr nekad nemazgājiet zobu suku rokturi trauku mazgājamā mašīnā. Tāpat nelietojiet to dušā.

Kādi tālruni ir saderīgi ar Philips Sonicare lietojumprogrammu?

Philips Sonicare lietojumprogramma atbalsta Android OS un Apple iOS. Lai iegūtu visjaunāko Philips Sonicare lietojumprogrammas versiju, apmeklējiet Android Play Store vai Apple App Store. Mobilajām ierīcēm ir jābūt aprīkotām ar Bluetooth 4.0 vai jaunāku versiju.

Kādas vēl Philips Sonicare zobu suku es varu lietot kopā ar Philips Sonicare lietojumprogrammu?

Ar Sonicare lietojumprogrammu jūs varat izmantot tikai Philips Sonicare Flexcare Platinum Connected, DiamondClean Smart, DiamondClean 9000 un ExpertClean zobu suku. Meklējiet Bluetooth simbolu iepakojuma priekšpusē.

Otrreizējā pārstrāde



- Šis simbols nozīmē, ka produktu nedrīkst likvidēt kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem (2012/19/ES).



- Šis simbols nozīmē, ka šajā produktā ir iebūvēts atkārtoti uzlādējams akumulators, kuru nedrīkst likvidēt kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem (2006/66/EK). Lūdzu, nododiet produktu oficiālā savākšanas punktā vai „Philips” pakalpojumu centrā, lai profesionālis izņemtu atkārtoti uzlādējamo akumulatoru.
- Ievērojiet vietējos noteikumus par elektrisko un elektronisko produktu un atkārtoti uzlādējamo bateriju atsevišķu savākšanu. Pareiza produktu likvidēšana palīdz novērst kaitīgu iedarbību uz vidi un cilvēku veselību.

Atkārtoti uzlādējamā akumulatora izņemšana ekspluatācijas cikla beigās

Brīdinājums!

- Izņemiet uzlādējamo akumulatoru tikai tad, kad likvidējat rokturi.
- Izņemot akumulatoru, pārliecinieties, ka tas ir pilnībā iztukšots.
- Jebkurš mēģinājums izņemt akumulatoru anulē garantiju.

Lai saņemtu palīdzību, apmeklējiet www.philips.com/support vai zvaniet uz bezmaksas tālruna numuru 1 800 2433050.

Uzlādējamā akumulatora izņemšana


Bīdinājums. Uzlādējamo bateriju izņemiet tikai tad, kad izmetat ierīci. Izņemot bateriju, pārliecinieties, ka tā ir pilnīgi tukša.

Lai izņemtu uzlādējamo bateriju, nepieciešams dvielis vai drāna, āmurs un plakangala (standarta) skrūvgriezis. Ievērojiet pamata piesardzības pasākumus, veicot tālāk norādīto procedūru. Noteikti aizsargājiet acis, rokas, pirkstus un darba virsmu.

- 1 Lai pilnībā iztukšotu atkārtoti uzlādējamo akumulatoru, noņemiet rokturi no lādētāja, ieslēdziet Philips Sonicare un ļaujiet ierīcei darboties, līdz tā apstājas. Atkārtojiet šo darbību, līdz Philips Sonicare vairs nevar ieslēgt.




- 2 Noņemiet un izmetiet sukas uzgali. Pārklājiet visam rokturim dvieli vai drānu.

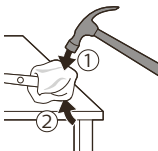


- 3 Turiet roktura augšgalu ar vienu roku un iesitiet pa roktura korpusu aptuveni 1 cm virs apakšdaļas. Iesitiet ar āmuru pa visām 4 malām, lai izņemtu vāciņu.


Piezīme. Iespējams, būs jāiesit vairākas reizes, lai salauztu iekšējos savienojumus.

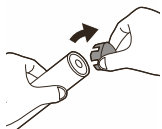


- 4** Noņemiet vāciņu no zobu sukas roktura. Ja vāciņu nevar viegli noņemt no korpusa, atkārtojiet 3. darbību, līdz vāciņš ir noņemts.

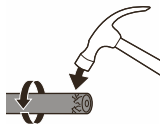


- 5** Turot rokturi otrādi, spiediet to leju pret cietu virsmu. Ja iekšējie elementi viegli neatbrīvojas no korpusa, atkārtojiet 3. darbību, līdz iekšējie elementi ir atbrīvoti.

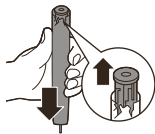

- 6** Iespiediet skrūvgriezi starp bateriju un melno rāmi iekšējo elementu apakšā. Pēc tam spiediet skrūvgriezi prom no baterijas, lai salauztu melnā rāmja apakšdaļu.

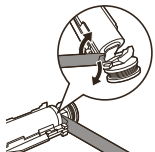


- 7** Ievietojiet skrūvgriezi starp baterijas apakšdaļu un melno rāmi, lai salauztu metāla cilni, kas savieno bateriju ar zaļo drukātās shēmas plati. Šādi tiks atdalīta baterijas apakšdaļa no rāmja.

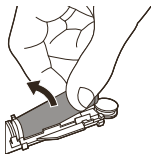

- 8 Satveriet bateriju un izvelciet to ārā no iekšējiem komponentiem, lai salauztu otro metāla baterijas cilni.

Ievērībai! Uzmanieties no baterijas cilņu asajām malām, lai nesavainotu pirkstus.

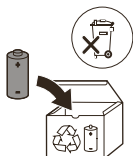

- 9 Pārklājiet baterijas kontaktus ar lenti, lai novērstu elektrisko īsslēgumu no atlikušā baterijas lādiņa. Uzlādējamo bateriju tagad iespējams otrreizēji pārstrādāt, un atbilstoši atbrīvojies no pārējās ierīces.

Piezīme. Neizmetiet ierīci kopā ar sadzīves atkritumiem tā dzīves cikla beigās, bet aiznesiet to uz oficiālu pārstrādes savākšanas punktu. Tā rīkojoties, jūs palīdzat saglabāt vidi.

Garantija un atbalsts

Ja nepieciešama informācija vai atbalsts, lūdzu, apmeklējiet vietni www.philips.com/support vai lasiet starptautiskās garantijas bukletu.

Garantijas ierobežojumi

Starptautiskās garantijas noteikumi nesedz tālāk minēto.

- Sugas uzgaļi.
- Neapstiprinātu rezerves daļu izmantošanas radīti bojājumi.
- Bojājumi, kas radušies nepareizas, ļaunprātīgas lietošanas, nolaidības, pārveidojumu vai neatļauta remonta dēļ.
- Parastās darbības radīts nodilums un bojājumi, piemēram, robi, skrāpējumi, švīkas, krāsas izbalēšana vai izmaiņas.